



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

ALMOFADA DE MASSAGEM WIRELESS PILLOW

RM-ES1902A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sumário

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	5
4. DESCRIÇÃO DO CONTROLE.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	6
6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	6
7. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para áreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

Almofada com 12 mecanismos de massagem Shiatsu, design ergonômico que se ajusta ao contorno do corpo para proporcionar o máximo de conforto e suporte às costas. É portátil e funciona sem fio. Por ser leve, pode ser usado em qualquer lugar e a bateria recarregável facilita o uso. Possui intensidade ajustável com 2 níveis, alta e baixa, de massagem Shiatsu, função aquecimento que ajuda a relaxar e diminuir a tensão, temporizador de 15 minutos e sistema de proteção contra superaquecimento.

Pode ser usado para massagear pescoço e ombro, parte superior e inferior das costas, coxas e pernas.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;
- Nunca use nenhuma fonte de energia que não seja o adaptador fornecido com esse produto;
- Nunca use esse produto debaixo de cobertores onde a abertura de ar pode ser bloqueada;
- Não use esse aparelho para tratamento médico, para isso consulte um profissional
- Esse produto possui proteção contra superaquecimento
- Siga as instruções corretamente, a fim de evitar risco de ferimentos ou incêndios

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Este produto não deve ser usado por pessoas com diabetes.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo
 - Gestante
 - Flebite
 - Trombose
 - Doenças cardíacas
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano seco para a limpeza. Não utilize álcool ou produtos abrasivos. A capa é destacável e lavável. O material deste produto é sensível, portanto não force o material e não utilize objetos pontiagudos que possam perfurar o assento.


3. MODO DE USAR

1. Coloque o encosto de massagem na cadeira.
2. Conecte o cabo do adaptador ao cabo correspondente do aparelho.
3. Conecte o adaptador a uma tomada
4. Ligue o dispositivo usando o controle conectado ao encosto (consulte suas funções na sequência)



NOTA: Não use o massageador por mais do que 15 minutos. Usar o aparelho por mais tempo pode sobrecarregar os músculos e tencioná-los em vez de relaxá-los.

4. DESCRIÇÃO DO CONTROLE

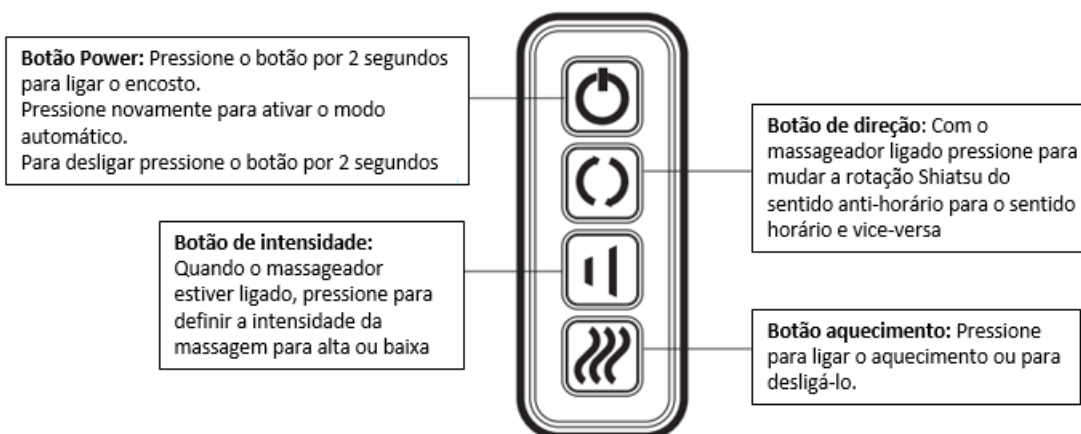

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas: 36x13,46x48 cm

Peso: 3,5Kg

Voltagem: Bivolt

Potência nominal: 26 W

Tempo máximo de execução de bateria: 80 minutos

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
Os pontos de massagem estão girando em menor velocidade.	Elas podem estar sobrecarregadas, reduza o peso que estiver sobre eles e tente novamente.
Dispositivo desliga repentinamente	O dispositivo pode estar em uso por mais de 15 minutos e por isso a função desligamento automático é ativada. Deixe o Encosto desligado por 15 a 30 minutos e ligue novamente apertando o botão "Power".
	A função de proteção contra superaquecimento pode ter sido ativada e por segurança o dispositivo foi desligado. Deixe-o desligado por 15 a 30 segundos antes de reiniciar.
Falha ao iniciar o dispositivo	Verifique se o dispositivo foi usado por mais de 15 minutos. Nesse caso deixe-o desligado por 15 minutos antes de ligá-lo novamente. O dispositivo pode exigir mais tempo para esfriar em ambientes mais quentes.
	A bateria está fraca, complete a bateria.
	Verifique se o adaptador está conectado adequadamente
O movimento de massagem está irregular	Pode ter sido aplicado pressão excessiva no dispositivo. Reduza a carga/pressão e tente novamente
A função aquecimento está acesa, mas não funciona	O dispositivo pode estar travado. Remova a pressão/carga que estiver nele e ligue novamente.

7. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.relaxmedic.com.br

contato@relaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688