



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

MASSAGEADOR DE PÉS MULTI 4 EM 1

RM-FM5001A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

2.	LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	7
3.	MODO DE USAR.....	7
4.	DETALHES DO PRODUTO.....	9
5.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9
6.	TERMOS DE GARANTIA.....	10

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

O MASSAGEADOR DE PÉS MULTI 4 EM 1 shiatsu, aquecimento, vibração e airbags com compressão em um só aparelho. Relaxe e revitalize os pés e pernas com uma experiência completa de massagem.

- Motores de vibração nas panturrilhas
- Airbags para massagem de compressão nos pés e panturrilhas
- Shiatsu e rolamento nos pés
- Terapia de calor no pés e também sobre o assento
- 3 níveis de intensidade
- Fechado, assemelha-se a um puff otomano, perfeito para apoiar os pés em qualquer ambiente
- Painel de controle multi-funções
- Temporizador de 15 minutos
- Barra de suporte para modificar a angulação até 20°
- Suporta até 90 Kg
- Para pés até o número 45
- Capas removíveis e laváveis, fácil higienização

Conteúdo da embalagem: 1 aparelho massageador de pés, 1 adaptador de energia e 1 manual do usuário.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados do MASSAGEADOR DE PÉS MULTI 4 EM 1 podem aumentar efetivamente sua vida;

As tomadas de alimentação elétrica precisam estar dentro dos padrões da norma brasileira ABNT NBR5410 de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Conforme a norma recomendamos

não utilizar adaptadores para plugs de tomada, pois podem causar mau contato na alimentação do equipamento, onde tais oscilações nas tensões prejudicam os circuitos eletrônicos internos. É essencial cuidados com animais domésticos, pois podem adentrar ou eliminar secreções que podem causar curto circuito na parte eletrônica inferior por dejetos e secreções dos animais, causando danos não coberto pela garantia de fábrica.

Ambiente de uso

1. Não use o massageador em um ambiente excessivamente úmido ou poeira.
2. Não use em locais com temperatura acima de 40°C.
3. Não coloque ao ar livre.
4. Não use próximo a forno elétrico, fogão ou luz solar direta.

Atenção

1. Não use o massageador para outros fins que não a massagem. Isso pode resultar em acidente ou ferimento.
2. Não permita que crianças ou pessoas incapazes de operar o equipamento operem o massageador.
3. Não use o massageador quando a tampa do tecido estiver rasgada ou ausente.
4. Não cubra o massageador durante a operação. Isso pode resultar em aumento da temperatura do motor e subsequente quebra ou possível incêndio.
5. Não se levante ou sente no próprio massageador.
6. Não substitua nenhuma peça, a menos que seja do fabricante.
7. Não insira ou deixe cair um objeto na abertura do produto.
8. Não durma enquanto estiver usando o massageador.
9. Este produto não pode ser usado com tratamento. Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
10. Não use se estiver sob o efeito do álcool ou doente.
11. Indicamos que use somente após uma hora após as refeições.
12. Não use por mais de mais de 30 minutos seguidos.
13. Não insira o dedo da mão ou pé no rolo (mecanismos internos) deste produto.
14. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

Instâncias em que o massageador não deve ser usado

Nas seguintes circunstâncias, desligue a energia imediatamente e desconecte o plugue da fonte de alimentação da tomada elétrica:

1. Se derramar água no massageador.
2. Se sentir dor intensa ou anormal durante a massagem, pare a operação e consulte seu médico.
3. Se você detectar qualquer mau funcionamento ou qualquer outra condição anormal durante a operação.

4. Se houver uma falha de energia, poderão ocorrer ferimentos quando a energia for restaurada inesperadamente.

5. Se houver raios.

Desmontagem e reparo

1. O massageador só deve ter revisão ou reparação pelo centro de atendimento ao cliente da Relaxmedic ou parceiros credenciados.

2. Os usuários NÃO devem desmontar ou reparar o massageador.

Notas sobre o plugue e o cabo de alimentação

1. Não desconecte o plugue da tomada elétrica com força.
2. Não conecte ou desconecte o plugue da tomada com as mãos molhadas. Isso pode resultar em choque elétrico ou problemas na máquina.
3. Ao desconectar o plugue, puxe-o segurando o plugue, não o cabo.
4. Não coloque o cabo de alimentação sob o objeto pesado.
5. Não enrole o cabo de força ao redor do massageador durante a operação, pois isso pode danificá-lo e resultar em incêndio ou choque elétrico.
6. Não use o massageador com um cabo danificado ou adultere o cabo.
7. Use apenas o plugue e os acessórios fornecidos.
8. Não use o massageador se a tomada elétrica estiver excessivamente frouxa.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (ferimentos).
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:

- Marca-passo;
- Grávidas;
- Flebite;
- Trombose;
- Problemas circulatórios;
- Osteoporose;
- Acroparestesia;
- Ossos frágeis;
- Doenças cardíacas;
- Epilepsia;
- Tuberculose;
- Arritmia cardíaca grave;
- Pacientes com distúrbios hemorrágicos ou tendência a este tipo de distúrbio;
- Crise de alergia;
- Febre alta
- Distúrbio de consciência.

- Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando conectado a tomada. Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver usando-o e antes de limpá-lo.
- Não use na banheira nem durante o banho.
- Não enrole o cabo elétrico excessivamente, pois isso pode causar danos ao cabo.
- Não toque no aparelho se ele tiver caído na água. Retire imediatamente da tomada.
- Não fique em pé sobre o aparelho. Use somente sentado.
- Não use o aparelho sob um cobertor, poderá ocorrer um superaquecimento e causar um incêndio, choques elétricos ou ferimentos.

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO


1. Certifique-se de remover o plugue da tomada elétrica antes de limpar o massageador.
2. Não use gasolina, diluente ou qualquer outro solvente abrasivo no massageador.
3. Use um pano seco ao limpar o massageador, nunca use um pano úmido para limpar o massageador ou o interruptor.
4. Quando necessário, remova as tampas de tecido para limpeza para garantir uma boa higiene.
5. Quando não estiver em uso por um longo período, é aconselhável que o cabo de força do massageador seja enrolado na parte inferior do massageador e seja armazenado em um local livre de poeira e umidade.
6. Não guarde o massageador perto de calor intenso ou de uma chama aberta. Não deixe o massageador sob luz solar direta por um longo período de tempo.

3. MODO DE USAR

1. Coloque o produto no chão plano.
2. Conecte o cabo adaptador na entrada correspondente no aparelho
3. Conecte o adaptador doméstico na tomada elétrica (lembrando que é seguro para uso 110-120V, pois é bivolt)



4. Puxe a alça do puff, abra o produto, e use como massageador de pés e pernas.

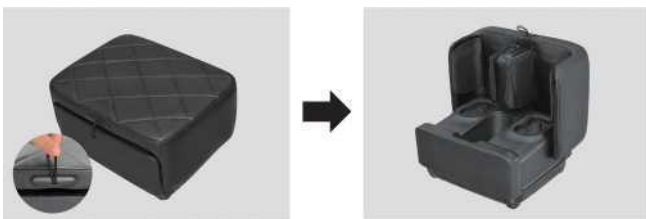

5. Ajuste a barra de suporte na parte inferior do produto para o ângulo de massagem desejado.



6. Sente-se confortavelmente e deixe o aparelho à sua frente, com o lado do painel próximo a você. Introduza os pés no local indicado. Certifique-se de que os pés estão bem posicionados para que não haja nenhum tipo de desconforto durante a massagem.
7. Ligue o aparelho de massagem através do painel de controle (veja as instruções abaixo).
8. O aparelho desligará automaticamente após 15 minutos de uso.


Nota: Não configure ou use o dispositivo em banheiros ou áreas molhadas/úmidas semelhantes.

MODO PERNA

Pressione para escolher entre M1-M2 ou desligar.
M1: Ligue a função de pressão e vibração. Três indicadores acendem.
M2: Ligue apenas a função de pressão. Dois indicadores azuis acendem.

INTENSIDADE

Pressione para escolher Baixa/Média/Alta PRESSÃO.
Baixo- 1 indicador acende
Médio – 2 indicadores acendem
Alto – 3 indicadores acendem

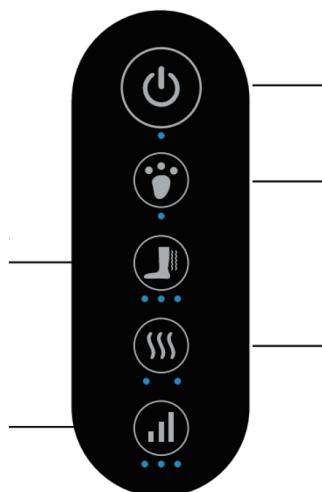

ON/OFF

Pressione para ligar/desligar o dispositivo

MODO PÉ

Pressione para ligar ou desligar a massagem shiatsu e rolamento nos pés.

AQUECIMENTO

Pressione para escolher entre baixo/alto/desligado

Nota:

Pressione o botão ON/OFF para ligar o massageador e ativar a configuração padrão, o dispositivo funciona no MODO 1. O Shiatsu do pé é ativado, a função de aquecimento do pé é desativada.

Após o uso, utilizando como puff otomano:

1. Desligue o botão de energia no painel de controle.
2. Após a liberação da pressão dos airbags, feche o produto como um assento otomano.
3. Ligue a função de aquecimento na parte lateral inferior do aparelho para obter um assento quente e confortável. Você pode se sentar sobre ele ou apoiar as pernas, aquecendo a região das panturrilhas.



4. DETALHES DO PRODUTO



5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 49,8 x 38,9 x 30 cm (fechado) | 48,3 x 42,3 x 46 cm (aberto)

Peso: 9,43 kg

Alimentação: 127V/220V (Bivolt)

Potência: 36 W

Frequência: 50/60 Hz

Tamanho máximo de pés e panturrilhas: Pés até nº 45 com largura até 12 cm | Panturrilhas com até no máximo 15 cm de largura

Garantia: 1 ano

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **2 a 5 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688