




# Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## MASSAGEADOR ORBIT TOUCH

RM-MP0630A W

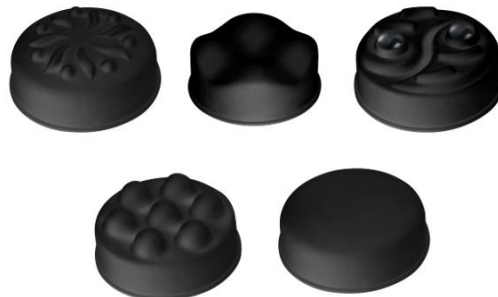

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Índice

APRESENTAÇÃO .....	2
1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	6
6. TERMOS DE GARANTIA.....	7

### APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

Garanta momentos de relaxamento, bem-estar e autocuidado com o Massageador Orbit Touch. Por ser leve e portátil você consegue usá-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. Com apenas um botão é possível ligar e desligar o aparelho e também controlar os níveis de intensidade da massagem. O massageador vem acompanhado de 5 acessórios que permitem realizar massagens localizadas, intensas e relaxantes. Ele alcança até 3200 RPM e conta com 6 níveis de intensidade, que vão de leve ao intenso, acionados com alguns toques. Com massagem profunda, de até 10 mm, as ponteiros são ideais para massagens nas coxas, culote, panturrilhas, bumbum e também regiões como braços, ombros e barriga, entre outros pontos. Possui tela de proteção para usar próximo ao cabelo. Com o Massageador Orbit Touch, você pode realizar massagens localizadas, mas também massagens de relaxamento que ajudam a diminuir a tensão e cansaço causados pelo dia a dia.

## 1. CUIDADOS

### **IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto. Mantenha fora do alcance das crianças.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
  - Com marca-passo;
  - Em recuperação de cirurgia;
  - Diabetes;
  - Flebite;
  - Trombose;
  - Gravidez;
  - Doenças cardíacas;
  - Sofre de enxaquecas;
  - Distúrbios neuropáticos;
  - Protusão discal;
  - Inflamações da coluna vertebral;
  - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

## 2. LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho, retire-o da fonte de energia e deixe esfriar.
- Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para limpeza do aparelho.
- Não utilize produtos químicos para realizar a limpeza do aparelho. Não é recomendado lavar a tela de proteção. Para limpeza, enxague suavemente com água.
- Não recomenda-se o uso de creme e ou loção com o massageador. Isso pode danificar o motor.

## 3. MODO DE USAR

O massageador desliga automaticamente em 15 minutos, o tempo de duração recomendado para realização da massagem é de até 30 minutos.

### A) Antes do Uso

1. Antes de utilizar o aparelho, verifique se o aparelho está carregado.

- 
2. O carregamento total do aparelho é indicado quando todas as luzes do painel estiverem acesas.
  3. Selecione o acessório desejado para a massagem e em seguida coloque a rede de proteção;
  4. Posicione o massageador no local desejado e aperte o botão de ligar;
  5. Para aumentar a intensidade aperte o mesmo botão. A cada toque uma luz acenderá indicando em qual nível o massageador está.
  6. Para desligar basta apertar o mesmo botão.

## **B) Sugestão de Uso**

1. Escolha a velocidade que deseja usar, deslize suavemente no corpo. **Recomenda-se usar na velocidade baixa e aumentar gradativamente, sempre de forma que a massagem esteja confortável (sem dor).**


## **C) Troca de acessórios**

1. Para efetuar a troca dos acessórios desrosqueie a parte externa, em sentido horário. Quando soltar coloque o acessório desejado e rosqueie a peça novamente.

**4. DETALHES DO PRODUTO**



**ACESSÓRIOS:**

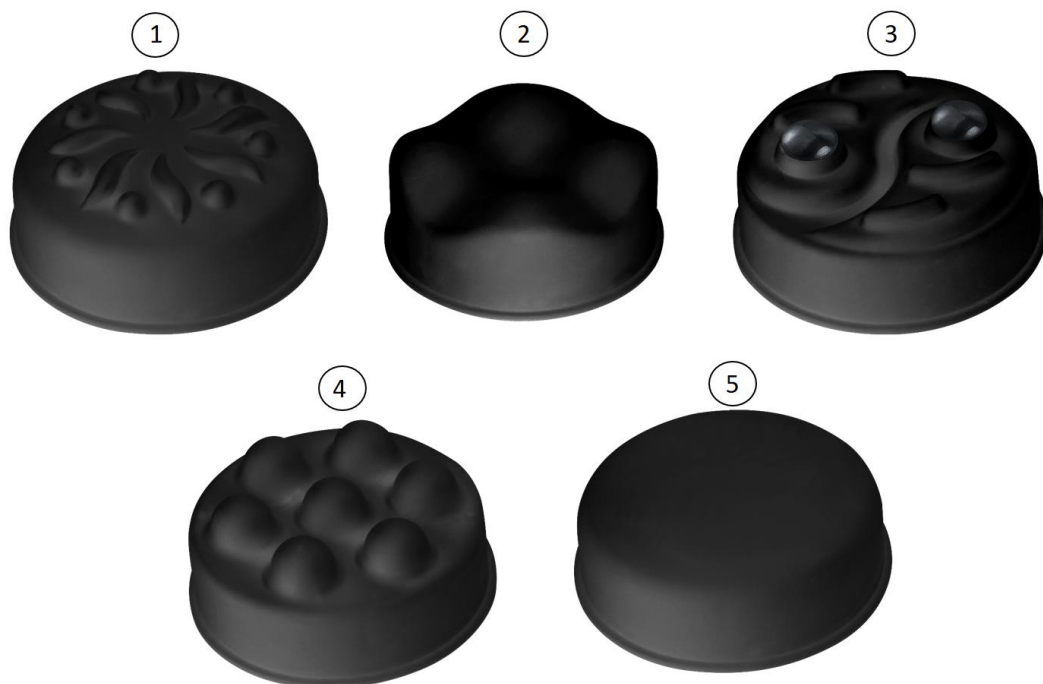

- 
- 1) Estrelas | Massagem com pressão, ideal para áreas como as costas e sola dos pés, proporcionando alívio e relaxamento.
  - 2) Ondulado | Massagem profunda para corpo inteiro que auxilia no alívio do estresse e relaxa os tecidos musculares. Pode ser usado também para ajudar na redução de gordura e celulite.
  - 3) Magnético | Ideal para ser utilizado no abdômen. Possui pequenos círculos de metal que estimulam o local da massagem.
  - 4) Rolamento | Possui pontos que auxiliam no relaxamento de tecidos profundos e alívio de tensão. Também é indicado para cuidados estéticos localizados, como pernas, culote, bumbum, abdômen.
  - 5) Liso | Indicado para grandes grupos musculares, como peito, costas e pernas, ajudando a relaxar e aliviar a tensão nestes locais.

## INSTRUÇÕES DE BATERIA

No momento da carga, as luzes indicadoras acenderão uma a uma e depois se apagarão.

**Primeira carga de bateria:** Recomenda-se carregar o aparelho por cerca de 3 horas.

**Tempo de carregamento (capacidade da bateria de 1500mAh):** 130 minutos

**Tempo de funcionamento do massageador em cada nível de massagem:**

Nível 1: 170 minutos;

Nível 2: 165 minutos;

Nível 3: 160 minutos;

Nível 4: 145 minutos;

Nível 5: 130 minutos;

Nível 6: 100 minutos.

## 5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Tamanho do produto:** 16 x 13,4x 8,5 cm

**Peso:** 515 g

**Material:** Plástico ABS

**Capacidade da bateria:** 1500mAh

**Tipo de Interface:** USB-Tipo-C, 8,4V/1A

**Decibéis:** Até 45dB no nível 6

**Tensão de carregamento:** 5V

**Tensão nominal:** 7,4 V

**Potência:** 30W

**Profundidade de Massagem:** até 10 mm

**Conteúdo da embalagem:**

1 x Massageador

5 x Acessórios de massagem

1 x Tela de proteção

1 x Cabo de Carregamento USB

**Rotação por minuto (RPM) de acordo com o nível de massagem:**

---

Nível 1: 2.330 RPM;  
Nível 2: 2.540 RPM;  
Nível 3: 2.650 RPM;  
Nível 4: 2.720 RPM;  
Nível 5: 2.950 RPM;  
Nível 6: 3.200 RPM.

## 6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688