



**Relaxmedic**

ESPECIALISTA EM CONFORTO

**MASSAGEADOR CORPORAL  
BODY THERAPY**

RM-MP6570A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

### Índice

APRESENTAÇÃO .....	3
1. CUIDADOS.....	4
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	7
7. TERMOS DE GARANTIA.....	7

---

### APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

O massageador age nos tecidos mais profundos, por meio de uma massagem relaxante e revigorante, com um motor poderoso consegue chegar a 3600 rotações por minuto.

Sua tecnologia de massagem de percussão pode aliviar a tensão muscular e desconfortos em diferentes partes do corpo, como: braços, pescoço, ombros, costas, pernas, panturrilhas, pés etc.

O massageador acompanha sete acessórios de massagem e conta com 6 diferentes configurações de velocidade e 6 modos de massagem ajustáveis.

Faça sua massagem a qualquer momento e em qualquer lugar, o massageador é leve, compacto, perfeito para ser levado onde e quando quiser!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

### 1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados do massageador podem aumentar efetivamente sua vida útil.


#### **IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto, manterá fora do alcance de crianças.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
  - Com marca-passo
  - Flebite
  - Trombose
  - Gravidez
  - Doenças cardíacas
  - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

### 2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza do seu massageador, desligue o aparelho, retire-o da tomada e deixe-o esfriar. Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para limpeza do aparelho. Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho, retire-o da tomada e deixe-o esfriar.

### 3. MODO DE USAR

1. Coloque o plugue na tomada
2. Pressione o botão “” para ligar o aparelho. O massageador irá iniciar na velocidade 1 (1S) e no modo 1 de massagem (A1).
3. Pressione o botão “SPEED” ajustar a velocidade da massagem. Selecione dentre as 6 velocidades que aparecem no visor (S1, S2, S3, S4, S5 ou S6).
4. Pressione o botão “MODE” ajustar o modo de massagem. Selecione dentre OS 6 modos de

massagem que aparecem no visor (A1, A2, A3, A4, A5 ou A6).

5. Pressione o botão “HEATING” para a opção de aquecimento. A função aquecimento deve ser usada com o acessório específico. Veja no item 4.O acessório irá acender uma luz vermelha indicativa quando o aquecimento estiver ligado.

6. O massageador desliga automaticamente após 15 minutos de uso do programa de massagem.

7. Após o uso tire o massageador da tomada.

#### 4. DETALHES DO PRODUTO

##### Acessórios e suas funcionalidades



1. **Acessório massageador de pés:** Ideal para ser usado nos pés

2. **Acessório para massagem circular:** Pode ser usado em qualquer parte do corpo.

3. **Acessório para massagem com aquecimento:** Age de forma direta e profunda nos tecidos intensificando o relaxamento

4. **Acessório para massagem localizada e profunda:** Massagem profunda com pontos de acupuntura, pode ser usado em todo corpo, exceto na cabeça.


5. **Acessório com seis mini massageadores locais:** Para massagem profunda nas costas e na cintura

6. **Acessório de massagem pontual:** Ideal para relaxamento muscular, e pequenos “nós” de tensão muscular

7. **Acessório para massagem com óleo ou creme:** Indicado para utilizar óleo ou creme enquanto realiza a massagem. ATENÇÃO PARA NÃO PERMITIR QUE O CREME OU OLEO ENTRE NO MECANISMOS DO MASSAGEADOR.

### Troca de Acessórios

#### A) Peças Pretas

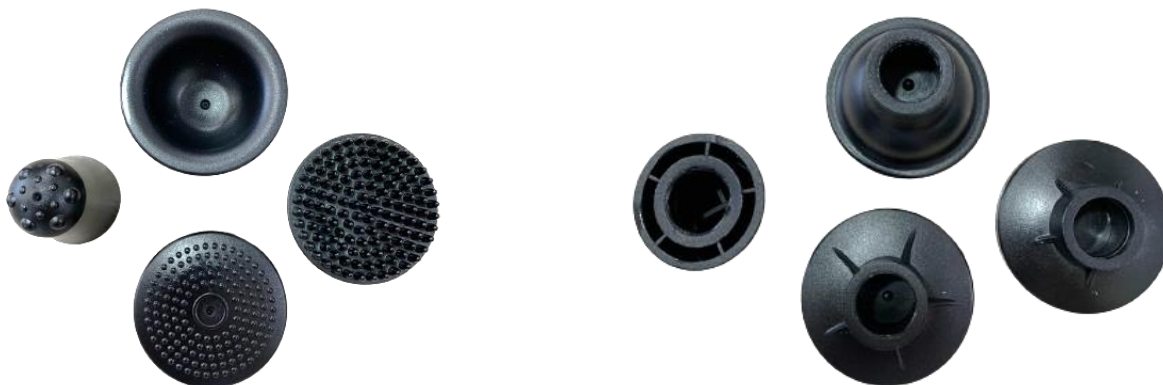

Para colocar as peças pretas (1,4,6,7) basta posicionar no massageador e rodar o acessório sentido horário para facilitar seu encaixe. Não é necessário forçar o acessório.

#### B) Peças Brancas



Para colocar as peças brancas (2,3,5) é necessário se atentar ao seu encaixe correto. Observe na imagem acima que seu chanfrado deve ser encaixado corretamente no corte/fenda do massageador, faça o encaixe das partes circuladas em vermelho.



---

## 6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 12 x 6,5 x 42 cm

Voltagem: 127 V ou 220 V

Potência: 25 W

Frequência: 50 Hz

Peso do produto: 0,8 Kg

Comprimento do cabo carregador: 1,8m

Decibéis: ± 51dB

Conteúdo da embalagem: 1 Massageador, 7 acessórios de massagem e 1 Manual de Instruções

Garantia: 1 ano

## 7. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688