



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

NECK & BACK SHIATSU SEAT PLUS

RM-AS8187A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

APRESENTAÇÃO	2
1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	4
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
6. TERMOS DE GARANTIA.....	6

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;

- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo
 - Gravidas
 - Flebite
 - Trombose
 - Doenças cardíacas
 - Gestante
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano seco para a limpeza.

3. MODO DE USAR

1. Coloque o assento no sofá ou cadeira
2. Ligue o massagedor pressionando o botão “Power” (ligar/desligar)
3. Será automaticamente ligado o modo automático de massagem. A luz azul do mecanismo de massagem irá ligar. Iniciarão as massagens do pescoço e costas na intensidade média (padrão)

Você pode controlar as funções as seguintes forma:

1. Aperte “Auto” para acionar o modo automático de massagem
2. Aperte “Costas” para iniciar o modo de massagem nas costas inteiras
3. Aperte “Subir” para os mecanismos de massagem das costas subirem
4. Aperte “Descer” para os mecanismos de massagem das costas descerem
5. Aperte “Ponto Fixo” para manter o mecanismo fixo em determinado ponto de massagem
6. Para delimitar uma área específica de massagem, pressione o botão “Auto”. Quando os mecanismos de massagem atingirem a altura desejada pressione ▲ da “Massagem costas”. Quando os mecanismos de massagem estiverem na parte baixa desejada pressione ▼ da “Massagem costas”.

Os mecanismos de massagem ficarão limitados dentro da área delimitada.

7. Massagem Pescoço:

- Aperte o botão “Total” para iniciar a massagem no pescoço. Pressione novamente para desligar a função.

- Segure o botão “▲” para movimentar os massagedores de pescoço para cima

- Segure o botão “▼” para movimentar os massagedores de pescoço para baixo



8. Aperte “Vibração” para acionar o programa de massagem vibratória. Aperte mais uma vez para a intensidade média e a terceira vez para a intensidade fraca. Aperte mais uma vez para desligar a função.

9. Função Aquecimento

Pressione o botão “Aquecimento” para ligar a função aquecimento dos mecanismos massagedores do pescoço e das costas. As luzes LED vermelhas irão acender. Para desativar o aquecimento pressione novamente “Aquecimento”.

O tempo de desligamento automático é de 15 minutos

4. DETALHES DO PRODUTO

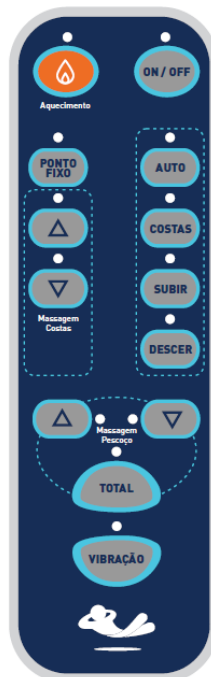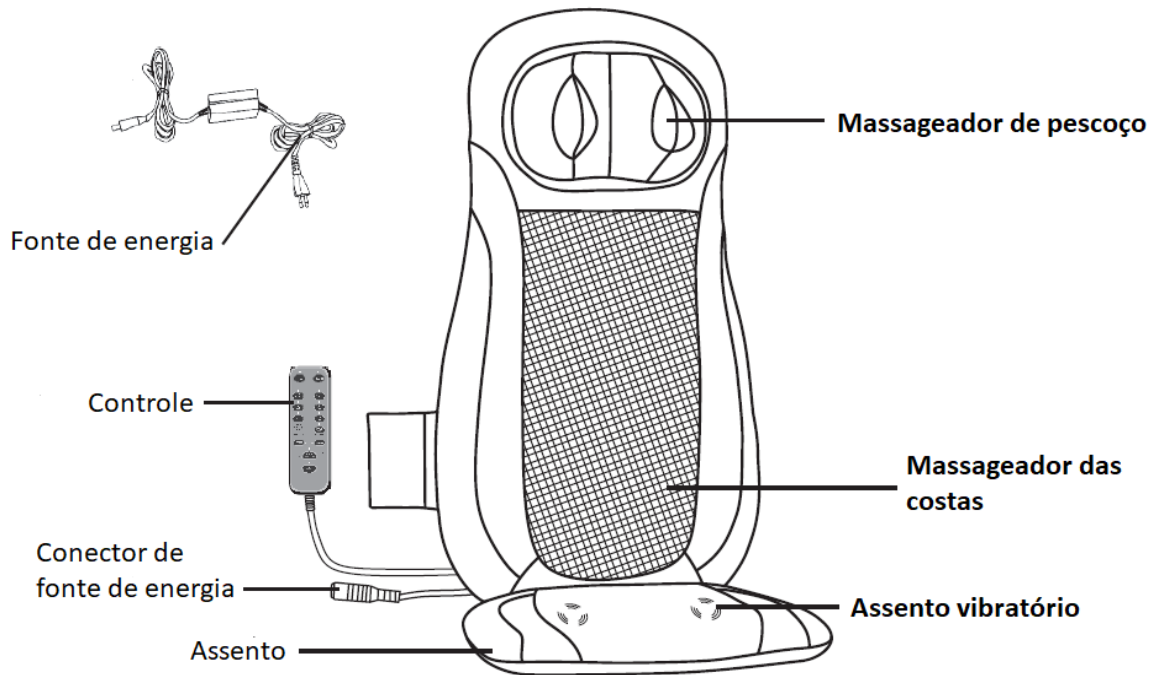

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 79 x 45 x 42 cm

Peso: 6,2 kg

Potência: 48 W

Frequência: 60 Hz

Voltagem: 127 V/220 V (Bivolt)

Garantia: 12 meses

6. TERMOS DE GARANTIA

Estrutura:

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

Revestimento:

Os revestimentos usados nos estofados tem garantia de **90 dias**, em relação a: esgaçamento da costura, desfiados não causados por mau uso e desbotamento natural.

Esta garantia não abrange:

Enfraquecimento normal das fibras, causados pelo uso do produto; Achatamento; Pilling (bolinhas); Diferenças de tonalidade do revestimento entre as partes do produto, detectadas após a entrega;

possíveis deformações ocasionadas pela lavagem do estofado e danos causados pelas impermeabilizações. Não esqueça: veludos e tipos aveludados (Suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

Espumas:

A garantia para espumas é de **90 dias** em relação à perda de resistência. É importante saber que com o uso do estofado e o passar do tempo, é normal as espumas sofrerem uma pequena deformação. Não esqueça: o amaciamento dos assentos e das almofadas são conseqüências naturais da utilização do produto. Algumas deformações são perfeitamente normais, não podendo ser confundidas com defeitos.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688