



**Relaxmedic**

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## **ORBIT MASSAGE**

RM-MP4018A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

---

## Índice

APRESENTAÇÃO .....	2
1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	3
4. DETALHES DO PRODUTO.....	5
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	5
6. TERMOS DE GARANTIA.....	6

### APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

Com o massageador portátil Orbit Massage da Relaxmedic o bem estar e o relaxamento estão garantidos! Você irá desfrutar de massagens localizadas e potentes sempre e o melhor, no conforto de sua casa.

O Orbit Massage da Relaxmedic possui um super motor, de 2.600 rotações por minuto, que garante uma massagem localizada, eficaz e relaxante. Seu botão de controle de intensidade de massagem é mais precis, ideal para acompanhar seus diversos acessórios que oferecem massagens mais vigorosas localizadas ideais para bumbum e pontos como coxas, panturrilhas e culottes, as esferas massageadoras perfeitas para regiões como ombros, costas e barriga. O disco rolete tem diferentes formatos massageadores para você se sentir Relax e aliviar tensões e cansaço, e tem mais, uma tela lavável que facilita a higienização do massageador..

## 1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil.

- Mantenha fora do alcance das crianças.

### **IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um médico antes de usar o produto:
  - Com marca-passo
  - Flebite
  - Trombose
  - Gravidez
  - Doenças cardíacas
  - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

## 2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza desligue o aparelho, retire-o da tomada e deixe-o esfriar.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para limpeza do aparelho.

## 3. MODO DE USAR

### **A) Antes do Uso**

1. Antes de ligar o aparelho na rede elétrica, verifique se a tensão utilizada é a mesma do seu aparelho (127 V ou 220 V);
2. Selecione o acessório desejado para a massagem e em seguida coloque a rede de proteção;
3. Coloque o plugue na tomada de alimentação e certifique-se que ambos estão firmes;
4. Posicione o massageador no local desejado e ligue seu aparelho girando o botão suavemente no sentido horário;
5. Para desligar, gire o botão no sentido anti-horário até ouvir um click;

### B) Sugestão de Uso

1. Escolha a velocidade que deseja usar, deslize suavemente no corpo. **Recomenda-se usar na velocidade baixa e aumentar gradativamente, sempre de forma que a massagem esteja confortável (sem dor).**

### C) Troca de acessórios

1. Para efetuar a troca dos acessórios coloque os dedos nas cavidades do produto (imagem 1) e puxe de uma vez só lentamente (imagem 2).



(imagem 1)




(imagem 2)

**Importante:** Não faça o movimento “vai e volta” (imagem 3) no cabeçote do seu produto, poderá danificá-lo.



(imagem 3)

#### 4. DETALHES DO PRODUTO

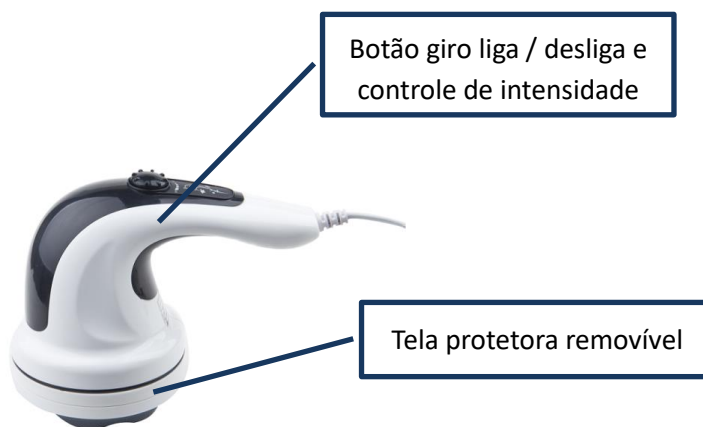

#### ACESSÓRIOS:

- 01) Esferas: ideal para usar com creme redutor de medidas e celulite na barriga, culote, coxa e bumbum
- 02) Lixa: esfoliante de calosidades
- 03) Hélice: massagem intensa e revigorante (uso apenas por cima da roupa)
- 04) Onda: massagem relaxante

#### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos de Massagem: Circular e Orbital  
Rotação por Minuto (RPM): 2.600  
Voltagem: 127 ou 220 V (não é bivolt)  
Frequência: 50Hz  
Potência nominal: 25W  
Dimensões: 16 x 18 x 10 cm  
Peso: 0,8 kg

---

## 6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688