



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

**MASSAGEADOR ELÉTRICO
DEEP THERAPY
RM-MP0651A**



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

APRESENTAÇÃO	3
1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	5
4. DETALHES DO PRODUTO.....	7
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	8
6. TERMOS DE GARANTIA.....	8

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de beleza, higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

O MASSAGEADOR ELÉTRICO DEEP THERAPY possui uma intensa massagem vibratória sem fio, que ajuda a aliviar a dor e rigidez muscular. Você pode usá-lo em casa, academia e escritório.

- 6 acessórios de massagem diferentes (fornecendo tratamento direcionado para cada grupo muscular).
- Massagem vibratória.
- Sem fio.
- Painel de Controle LCD: Tenha o controle de todas as funções apenas ao toque.
- 20 velocidades variáveis.
- Tecnologia de redução de ruído.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

- A manutenção e os cuidados adequados do massageador podem aumentar efetivamente sua vida útil.
- É apenas para adultos. Se você tiver ferimentos, não use este dispositivo. Por favor, consulte o seu médico antes de usá-lo.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Ferimentos podem ocorrer independentemente da configuração do controle ou da pressão aplicada. Verifique as áreas tratadas com frequência e pare imediatamente ao primeiro sinal de dor ou desconforto.
- Não mergulhe na água. Mantenha-o longe de líquidos ou fontes de calor. Mantenha a ventilação livre de poeira e resíduos.
- Não mergulhe na água nem permita que a água entre nos orifícios de ventilação do massageador.
- Recarregue apenas com o carregador fornecido.
- Não use o carregador fornecido para carregar outros produtos.
- Examine cuidadosamente o dispositivo e a bateria antes de cada uso.
- Nunca deixe o massageador em operação ou carregando sem vigilância.
- Não remova os parafusos ou tente desmontar.
- Não opere continuamente por mais de 30 minutos.

- Desconecte o carregador da bateria do dispositivo após o carregamento ou antes do uso.

Perigo: Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio e lesões pessoais, este produto deve ser usado de acordo com as seguintes instruções.

- Só pode ser utilizado em superfícies secas e limpas da pele do corpo e não pode ser utilizado em roupas. Pressione e aplique suavemente na pele. A duração de cada parte é de cerca de 60 segundos.
- Use apenas nos tecidos moles do corpo sem causar dor ou desconforto. Não use o massageador na cabeça ou em qualquer parte dura ou desossada do corpo.
- Utilize apenas a cabeça vibratória (*acessório*) que possa produzir os melhores resultados.
- A contusão pode ser causada sob pressão moderada ou pressão normal. Por favor, verifique sempre a área que recebe fisioterapia.
- Pare de usá-lo imediatamente quando houver qualquer sinal de dor ou desconforto.
- Mantenha os dedos, cabelos ou outras partes do corpo afastados do eixo e da parte traseira da cabeça vibratória, pois podem ficar presos.
- Não coloque nenhum objeto na ventilação do dispositivo.
- Não derrube o dispositivo ou use-o incorretamente.
- Nunca opere ou troque o dispositivo de maneira autônoma.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos). Interrompa o uso caso sinta algum desconforto.
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo
 - Flebite
 - Trombose
 - Gravidez
 - Diabetes (com complicações como neuropatia ou retina danificar)
 - Cirurgia recente, epilepsia ou enxaqueca, hérnia de disco, entre outros
 - Recente substituição de articulações ou DIU
 - Pinos ou placas de metal
 - Doenças cardíacas
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

Limpe o dispositivo com uma toalha úmida leve e depois limpe-o com um pano macio para armazenamento ou coloque-o na caixa fornecida quando viajar.

3. MODO DE USAR



- Acessório redondo pequeno: Para pequenos grupos musculares, como braços e panturrilhas.
- Acessório de cabeça chata: Usado para ajudar a moldar os músculos do corpo.
- Acessório em forma de U: Adequado para pescoço, coluna vertebral e tendões.
- Acessório da cabeça cilíndrica: Adequado para impactar tecidos profundos, como meridianos, articulações, palmas e solas.
- Acessório de bola grande: Adequado para grandes grupos musculares, como braços, costas, quadris, coxas e panturrilhas.
- Acessório de cabeça almofadada: Diminuindo a vibração, para pessoas mais velhas. Massageie profundamente os músculos doloridos, use em todas as partes do corpo.

Conectar o acessório ao massageador

Escolha dentre os 6 acessórios de massagem personalizadas e conecte à pistola. Verifique se está realmente encaixado antes de ligar.

Introdução ao Carregamento do Produto


Carregue totalmente a máquina por 4/5 horas antes do primeiro uso ou depois de não usá-la por um longo tempo.

- 1- Verifique se o adaptador de carregamento está conectado corretamente à base de carregamento (porta DC IN), empurre o interruptor para a posição "OFF" na parte inferior da máquina.
- 2- Conecte o adaptador em uma tomada, a máquina estará carregando enquanto a luz verde estiver piscando.
- 3- O adaptador depois de conectado ficará vermelho durante o carregamento. Após 4-5 horas, estará totalmente carregado e o indicador ficará verde. E a luz verde da máquina ficará acesa, sem piscar para indicar a carga total.
- 4- Desconecte o carregamento do adaptador após a conclusão do carregamento.
- 5- Empurre o interruptor para a posição "ON" na parte inferior da máquina e o indicador acenderá.
- 6- Pressione o botão "⏻" para ativar a pistola de massagem.

7- Configuração de velocidades: Pressione o botão “**+**” para aumentar os níveis de velocidade, pressione o botão “**-**” para diminuir os níveis de velocidade de 20 velocidades de massagem diferentes. Aplique lentamente e mova a máquina ao redor do corpo, depois ajuste para o estado mais confortável.

8- Sugere-se usar a máquina por no máximo 15 minutos, a bateria pode durar no mínimo 2 horas. Pressione “**⏻**” para desligar a máquina manualmente.

9- Empurre o interruptor para a posição “OFF” na parte inferior da máquina para desligar e guardar a máquina na caixa de embalagem.

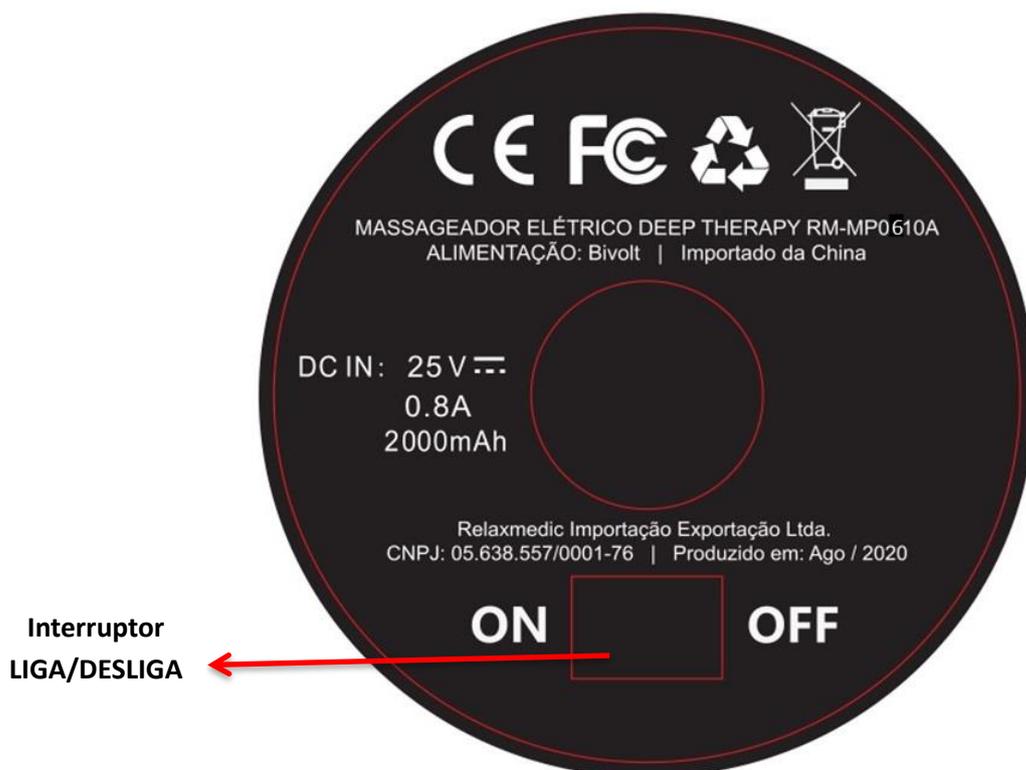

Ao carregar

- Antes de usá-lo pela primeira vez, carregue-o totalmente por 4/5 horas.
- Durante o carregamento, conecte a extremidade do carregador de 25V fornecido à base de carregamento da bateria e, em seguida, conecte o cabo à tomada da parede.
- A bateria pode ser carregada a qualquer momento e em qualquer nível.
- Não é recomendável usar o dispositivo quando a bateria estiver com um nível inferior a 20%.
- O tempo médio de operação do dispositivo é de seis horas, dependendo da velocidade e da pressão aplicada durante o uso.

4. DETALHES DO PRODUTO



Configurações

1. Botão liga / desliga
2. Porta de carregamento DC
3. Display de cristal líquido
4. LED de frequência de 6 níveis (azul)
5. Cabeça de vibração removível e substituível - ao remover a cabeça de vibração, apenas exerça sua força para puxá-la.
6. Carregador de parede AC

Níveis de Velocidade

São 20 níveis de velocidade, abaixo, sua performance por Rotação por Minuto (RPM):

- Nível 1-7: 1.800 RPM.
- Nível 8-15: 2.400 RPM.
- Nível 16-20: 3.200 RPM.

Recomendação de uso para cada nível de massagem:

- Nível 1 a 4: Despertar a musculatura
- Nível 5 a 8: Relaxamento Fascial
- Nível 9 a 12: Diminuição de fadiga muscular
- Nível 13 a 16: Massagem Profunda
- Nível 17 a 20: Modo Profissional

Recomendação de uso por região muscular:

Ombros: 15 a 20 segundos (3 repetições)

Torso: 30 segundos

Costas: 30 segundos a 1 minuto (3 repetições)
Pernas: 20 a 30 segundos (3 repetições)
Nádegas: 30 segundos a 1 minuto (4 repetições)

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 6,5 x 17 x 25,5 cm
Peso: 1,0 kg
Voltagem: Bivolt
Potência: 80W
Tempo de carregamento: 5 horas | Tempo de funcionamento: 4:30 horas
Capacidade bateria de lítio removível: 2000mAh
Frequência: 60 Hz
Tensão nominal: 25 V
Decibéis: 50dB

6. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de **1 ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções. Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para este produto.

A GARANTIA SOMENTE É VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688