



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

MASSAGEADOR PISTOLA DEEP THERAPY FLEX

RM-MP4000A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sumário

1. MEDIDAS DE SEGURANÇA	3
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO	3
3. ANTES DO USO	4
4. GUIA DE USO	6
5. ESPECIFICAÇÕES	8
6. GARANTIA	9

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. MEDIDAS DE SEGURANÇA

Este dispositivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças. Consulte seu médico antes do uso se sentir dor ou apresentar alguma das seguintes condições:

- Gravidez, diabetes, problemas de retina ou neuropatia.
- Presença de dispositivos médicos internos no corpo.
- Outras condições médicas ou preocupações de saúde.


Instruções de uso e segurança:

- Utilize um carregador de 5V/2A ou um adaptador de carregamento rápido.
- Carregue completamente o dispositivo antes do primeiro uso.
- Não troque os acessórios enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Não submerja o dispositivo em água ou outros líquidos.
- Evite massagear a cabeça, o peito, os genitais ou áreas com feridas.
- Não aplique a massagem em áreas cirúrgicas durante a cicatrização.
- Ao usar a pistola de massagem, evite regiões com alta concentração de linfonodos, nervos, vasos sanguíneos, áreas ósseas e órgãos internos.

Atenção: Este dispositivo possui uma bateria de lítio recarregável embutida. Não descarte o dispositivo com o lixo comum. Descarte-o corretamente seguindo as diretrizes de reciclagem locais.

2. VISÃO GERAL DO PRODUTO

Dispositivo

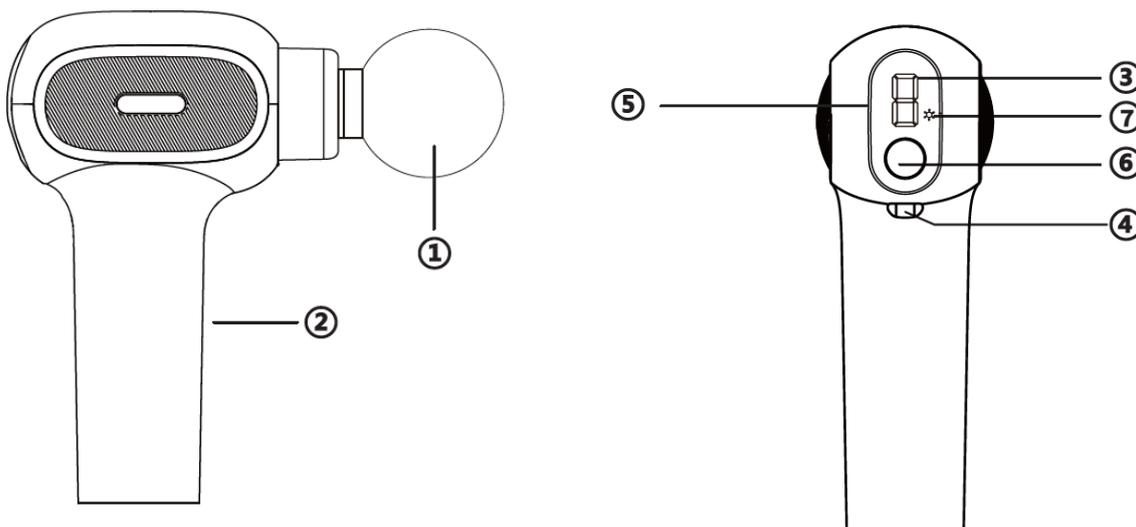

1. Acessório de massagem substituível
2. Cabo
3. Indicador de nível de velocidade da massagem
4. Entrada de carregamento USB-C
5. Luz indicativa de pressão
6. Botão de ligar/desligar e ajuste de velocidade
7. Indicador de aquecimento


Acessórios




Ponta
Esférica



Ponta
Forquilha

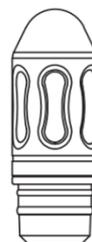

Ponteira

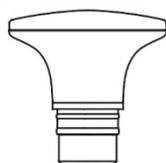

Ponta
Aquecida



Cabo de
Carregamento
USB




Cabo Extensor
Destacável

3. ANTES DO USO


Instalação do cabo extensor

1. Empurre o cabo firmemente
2. Gire o cabo para a direita de acordo com o símbolo de bloqueio, até que ele trave com segurança.
3. Há duas direções de instalação diferentes para massagem nas costas e nas pernas.

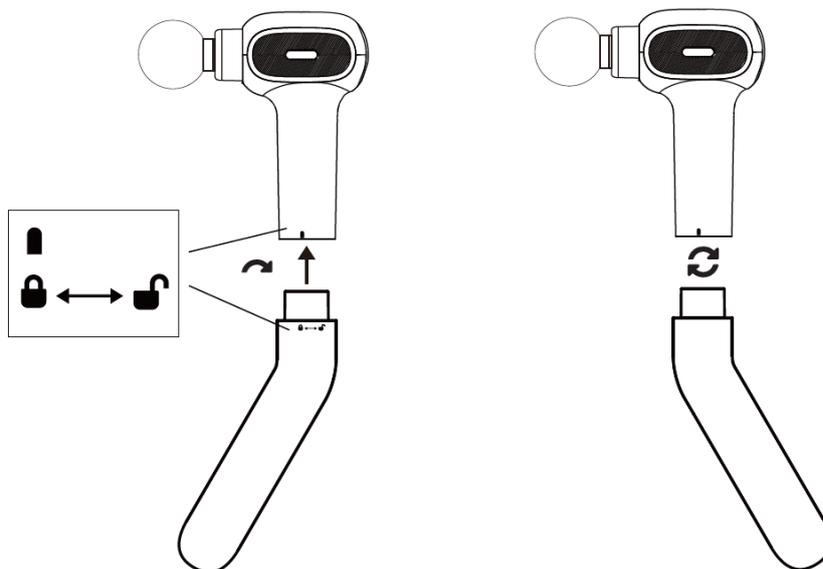

Remoção do cabo extensor

1. Gire o cabo para a esquerda na direção do símbolo de destravar 🔓.
2. Puxe com força (veja o diagrama).

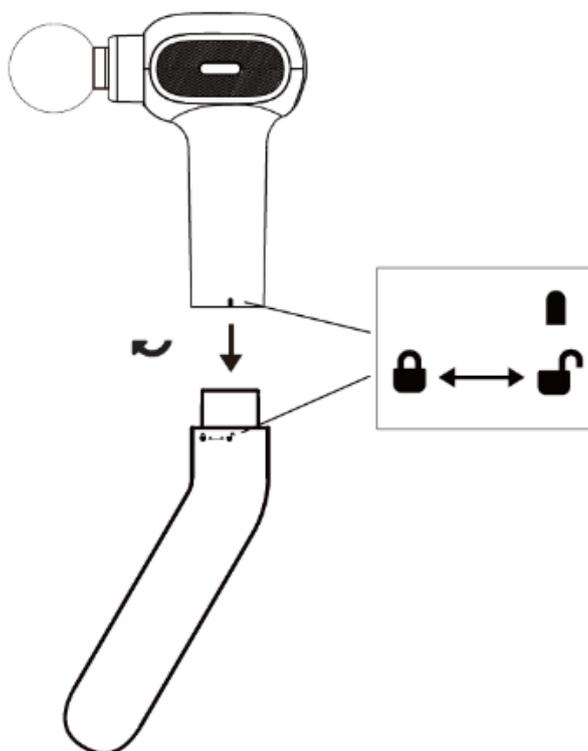

4. GUIA DE USO

Carregue o dispositivo

Conecte o cabo USB, incluído, a um adaptador de energia (não incluso). O indicador de bateria exibe o nível da carga.

Status de funcionamento

- A luz vermelha piscando rapidamente indica que o nível da bateria está baixo;
- O contorno do display pisca em vermelho por 3 segundos, indicando o desligamento devido à bateria baixa.

Status do carregamento

- A luz vermelha pisca lentamente - significa que a bateria está carregando.
- A luz branca permanece acesa - significa que a bateria está totalmente carregada.

Selecione o acessório




Ponta
Esférica



Ponta
Forquilha



Ponteira

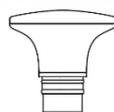

Ponta
Aquecida

Ponta Esférica: Indicada para grandes grupos musculares, como costas, coxas, glúteos e panturrilhas. Proporciona uma massagem mais suave e ampla, ideal para relaxamento geral e recuperação pós-treino.

Ponta Forquilha: Projetada para regiões que envolvem estruturas ósseas, como a coluna vertebral, pescoço e tendões de Aquiles. Permite massagem ao redor da musculatura sem pressionar diretamente os ossos.

Ponteira: Indicada para massagens mais profundas e localizadas, como em pontos gatilho ou áreas de tensão intensa. Ideal para regiões como ombros, palmas das mãos e plantas dos pés.

Ponta Aquecida: Oferece massagem com aquecimento, promovendo maior relaxamento muscular e alívio de tensões. É recomendada para uso em áreas rígidas ou doloridas, como lombar, pescoço e ombros, alcançando temperatura máxima de 45°C durante o aquecimento.

Ligue o dispositivo e escolha o modo desejado

- **Para acessórios SEM aquecimento:** pressione o botão ligar/desligar, por alguns segundos, para ligar. Pressione brevemente o botão de energia para alternar entre os modos, e alterne entre os modos 1/2/3/4/5/AI.
- **Para o acessório COM aquecimento (acessório metálico):** pressione o botão ligar/desligar, por alguns segundos, para ligar. O número "0" aparecerá e gradualmente uma luz laranja acenderá indicando que a pistola está ligada.
 - O modo de aquecimento será indicado pelo número "0" ". Apenas aquecimento, sem vibração.
 - Pressione rapidamente o botão liga / desliga para alternar os modos, segundo modo com quente e vibração, ele mostra "H".

Quanto maior a velocidade, maior a intensidade da massagem:

Velocidade 1 - 1600 RPM: Ideal para ativar os músculos ou aliviar dores intensas

Velocidade 2 - 1900 RPM: Para aliviar músculos cansados ou doloridos.

Velocidade 3 - 2200 RPM: Indicado para relaxar músculos rígidos.

Velocidade 4 - 2500RPM: Para massagear músculos muito rígidos ou nódulos profundos.

Velocidade 5 -2800 RPM: Ideal para áreas musculares específicas ou massagem de tecido profundo.

Velocidade AI - 1600-2800 RPM: Modo de velocidade adaptável à pressão, ajusta automaticamente a velocidade de acordo com a força de pressão.

A luz de mudança de intensidade é indicada pela luz azul, já o aquecimento pela luz laranja

Desligamento automático

Proteções do dispositivo:

- **Proteção:** Quando o massageador fica travado por questões de segurança, ele para de funcionar. Para restaurar o funcionamento, pressione o botão de liga/desliga.
- **Proteção contrabateria fraca:** Quando a tensão atinge 6,7V, o indicador vermelho começa a piscar. Se a tensão cair abaixo de 6,3V, a luz piscará em vermelho por 3 segundos antes do desligamento automático.
- **Proteção contratempo máximo de uso:** O dispositivo desliga automaticamente após 10 minutos de funcionamento. Para reiniciar, pressione o botão liga/desliga e ajuste a velocidade conforme necessário.

5. ESPECIFICAÇÕES

Modelo: RM-MP4000A

Dimensões: 368 x 120,5 x 62 mm

Peso: 585 g

Configurações de velocidade: 6

Velocidade: 1600 - 2800 RPM

Desligamento automático: Até 10 minutos ou baixa carga de bateria

Fonte de energia: Bateria de lítio recarregável

Tempo de carregamento da bateria: Aproximadamente 3 horas

Tempo de funcionamento médio: 2,5 horas de uso

Tensão máxima: 8,4 V


Corrente máxima: 6 A

Potência máxima: 51 W

Entrada nominal: 5V == 2A

Ruído de funcionamento: 55 dB

MEDIDAS DO DISPOSITIVO:

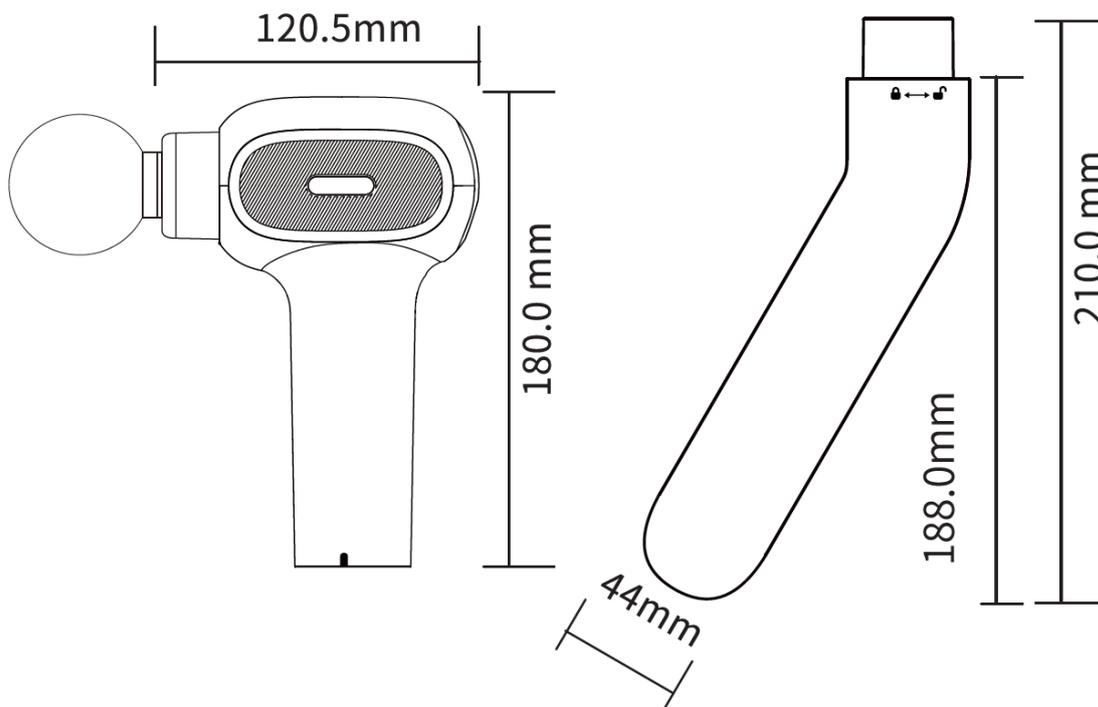

Indicador de nível de pressão

Status	Nível de pressão	Indicador
Azul	Modo suave (0 - 40%)	Operação normal
Laranja	Modo médio (40 - 80%)	Operação normal
Vermelho	Modo forte (0 - 100%)	Aviso de sobrecarga

6. GARANTIA

O produto possui **12 meses de garantia**, contados a partir da emissão da nota fiscal ou da entrega ao primeiro adquirente, sendo:

- **3 meses de garantia legal**
- **9 meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic.

A cobertura é válida desde que o produto tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações do manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma análise técnica para verificar a existência de defeito de fabricação. Caso sejam identificadas alterações na originalidade do produto, o conserto será cobrado. A central de atendimento entrará em contato com o cliente para informar o valor e o motivo do orçamento.

O produto deve ser enviado devidamente embalado, acompanhado da nota fiscal, dos dados cadastrais do cliente e de todos os acessórios originais.

Se o reparo não for possível, a Relaxmedic garante a substituição do produto.

A garantia será anulada nos seguintes casos:

- Instalação ou uso em desacordo com o manual de instruções.
- Sinais de violação ou mau uso.
- Danos causados por acidentes, quedas, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não autorizados pela Relaxmedic.

A GARANTIA É VÁLIDA SOMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor: Relaxmedic Importação, Exportação Ltda

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br Tel.: (11) 3393-3688