



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM BEM-ESTAR

MASSAGEADOR PISTOLA DEEP ZYRE IA

RM-MP0005A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1.	CUIDADOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA.....	3
2.	LIMPEZA.....	5
3.	DETALHES DO PRODUTO	6
4.	MODO DE USAR.....	7
5.	GUIA DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.....	9
6.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	10
7.	GARANTIA.....	11

Apresentação:

Parabéns! Você acaba de escolher um produto da Relaxmedic, a líder em produtos de massagem no Brasil! Nossa missão é proporcionar saúde e bem-estar de maneira prática e eficaz.

Explore nossa vasta linha de produtos, que inclui desde massageadores portáteis e específicos até poltronas que oferecem uma massagem completa, do topo da cabeça aos pés.

Na Relaxmedic, estamos comprometidos em inovar continuamente e oferecer produtos de alta qualidade, sempre com um atendimento ético e dedicado.

Sinta-se bem onde quer que esteja. Sinta-se Relaxmedic!

O Massageador Pistola Deep Zyre IA realiza uma massagem intensa e profunda, com 2.800 rotações por minuto (RPM), ideal para massagem miofascial ou pós treino. Seu tamanho é perfeito para levar onde quiser, já que é leve e pequeno (menor que um celular).

- 4 opções de ponteiros (01 ponteiro fixa + 03 de acessórios de silicone)
- 3 acessórios de massagem diferentes (massagem localizada, suave e profunda)
- Massagem profunda e potente de 5mm de pressão
- Carregamento USB.
- Leve, pequeno e de fácil transporte.
- 3 níveis de intensidade variáveis.
- Baixo ruído e fácil manuseio.
- Inclui maleta para armazenamento.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Este dispositivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.

Consulte seu médico antes do uso se sentir dor ou apresentar alguma das seguintes condições:

- Gravidez, diabetes, problemas de retina ou neuropatia.
- Presença de dispositivos médicos internos no corpo.
- Outras condições médicas ou preocupações de saúde.

Instruções de uso e segurança:

- Utilize um carregador de 5V/2A ou um adaptador de carregamento rápido.
- Carregue completamente o dispositivo antes do primeiro uso.
- Não troque os acessórios enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Não submerja o dispositivo em água ou outros líquidos.
- Evite massagear a cabeça, o peito, os genitais ou áreas com feridas.
- Não aplique a massagem em áreas cirúrgicas durante a cicatrização.
- Ao usar a pistola de massagem, evite regiões com alta concentração de linfonodos, nervos, vasos sanguíneos, áreas ósseas e órgãos internos.

Perigo: Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio e lesões pessoais, este produto deve ser usado de acordo com as seguintes instruções.

- Por favor, não pressione os órgãos internos durante o uso, caso contrário, pode causar desconforto físico ou acidentes.
- Mantenha os dedos, cabelos ou outras partes do corpo afastados do eixo e da parte traseira da cabeça vibratória, pois podem ficar presos.

ATENÇÃO: Pare de usar este produto em caso de algum desconforto no corpo, pele com vermelhidão ou prurido.

AVISO:

- Certifique-se de que não haja nenhum obstáculo entre o acessório de massagem e o corpo do massador, caso contrário, ele será bloqueado.
- Cuidado com quedas ou colisões, caso contrário, o produto pode ser danificado e não funcionar.

de forma anormal.

- Não utilizar o aparelho por muito tempo, isso pode fazer com que a temperatura do motor suba excessivamente.

Sobre a temperatura: Após 20 minutos de uso contínuo, a temperatura do produto começa a subir, após cerca de 50 minutos, o motor para de funcionar devido ao superaquecimento. Deixe o produto desligado por cerca de 5 minutos para resfriamento e assim poderá reiniciar e usar novamente.

IMPORTANTE:




- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos). Interrompa o uso caso sinta algum desconforto.
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
 - Com marca-passo, desfibrilador, aparelho coração-pulmão artificial, scanner de eletrocardiograma.
 - Com fraturas, osteoporose, hérnia de disco lombar, espondilolistese, anormalidades da coluna ou articulações.
 - Flebite ou flebotrombose, pacientes pulsáteis, diastólicos venosos, inflamação aguda, epilepsia e aqueles que fizeram cirurgia de substituição articular recentemente.
 - Com ferida no local de uso ou não tenham cicatrizado completamente.
 - Com doenças cardíacas, pressão arterial anormal e estado de embriaguez.
 - Com doença de pele ou infecção de pele, como neurodermatite, púrpura e acne, etc.
 - Com pele vulnerável e sensível, pacientes com implantes metálicos.
 - Trombose
 - Gravidez
 - Diabetes (com complicações como neuropatia ou retina danificar)
 - Cirurgia recente, epilepsia ou enxaqueca, hérnia de disco, entre outros
 - Recente substituição de articulações ou DIU
 - Pinos ou placas de metal
 - Pessoas com perda de nervo sensorial ou deficiência cognitiva.
 - Pacientes com tumor maligno.
 - Doenças cardíacas
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA

Limpe o dispositivo com uma toalha úmida leve e depois limpe-o com um pano macio para armazenamento ou coloque-o na caixa fornecida quando precisar.


Atenção: Este dispositivo possui uma bateria de lítio recarregável embutida. Não descarte o dispositivo com o lixo comum. Descarte-o corretamente seguindo as diretrizes de reciclagem locais.

3. DETALHES DO PRODUTO

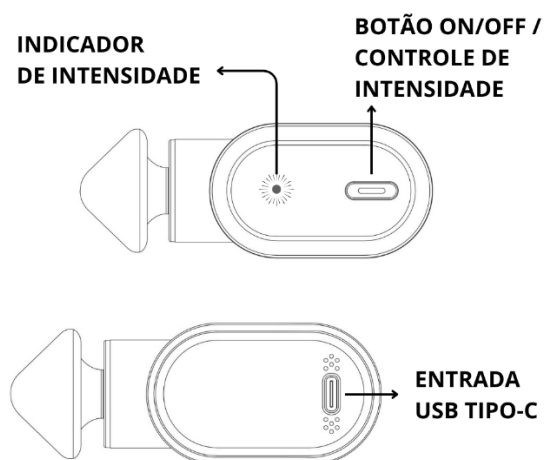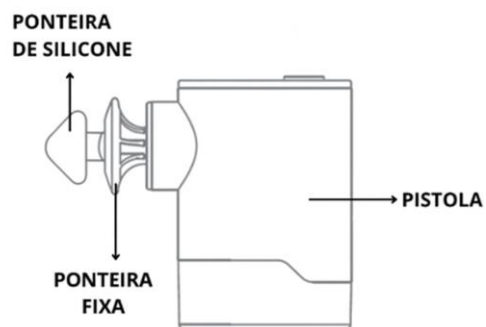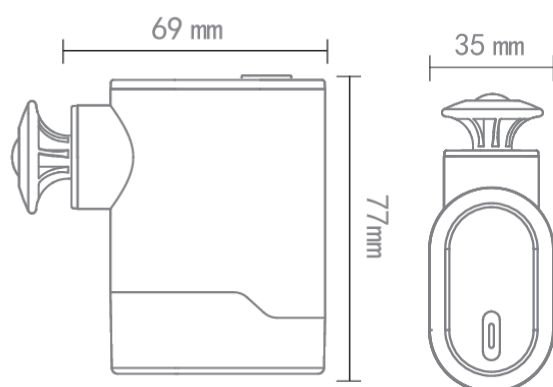

ACESSÓRIOS

1. Cabeça de massagem plana: Pressão direta em áreas específicas, ideal para liberar pontos, gatilho e nódulos de tensão de forma intensa.
2. Acessório Pontudo: Massagem profunda e intensa.
3. Acessório Redondo: Massagem suave, adequada para relaxamento muscular
4. Estimulo profundo: Com formato circular, estimula a circulação e proporciona relaxamento profundo em músculos grandes (ex: coxas, gluteos, etc.)
5. Cabo de Carregamento USB

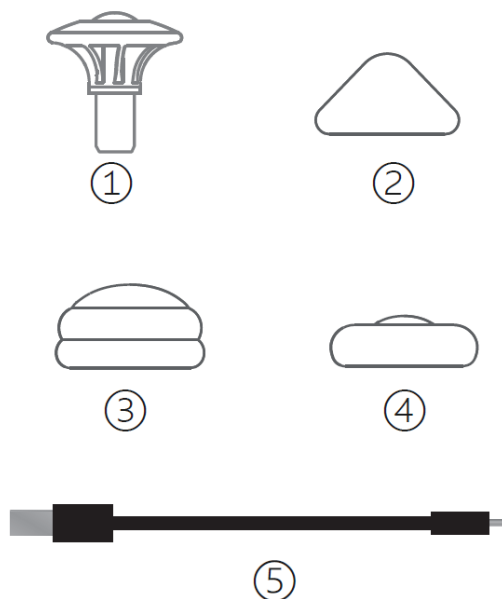

4. MODO DE USAR

Carregue o dispositivo

Conecte o cabo USB, incluído, a um adaptador de energia (não incluso). O indicador de bateria exibe o nível da carga.


Status de funcionamento

- Use apenas adaptadores 5V/2A com cabo USB-C incluso.
- Durante o carregamento → LED vermelho aceso.
- Carregado completamente → LED azul aceso.
- Tempo de carga: ~2 horas.
- Autonomia: até 4 horas no nível 1.


Nota: Quando a energia é insuficiente, a luz vermelha indicadora de energia pisca 5 vezes e em seguida apaga.

Instalação da Ponteira

1. Desligue o aparelho antes de trocar.
2. Encaixe a ponteira fixa.

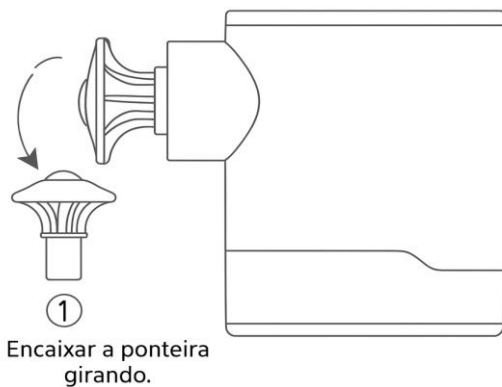

3. Escolha a ponteira desejada e encaixe suavemente.

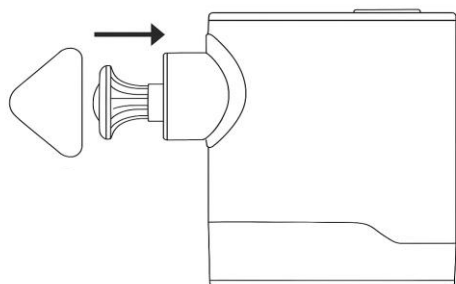

Ligando e Ajustando

- Pressione e segure o botão **ON/OFF** por 2 segundos para ligar.
- Pressione rapidamente o botão para mudar de nível:
- O aparelho inicia no **Nível 1**.
 - **Nível 1 (1600 RPM)** – LED verde.
 - **Nível 2:** LED vermelho – 2200 RPM
 - **Nível 3:** LED branco – 2800 RPM
- Para desligar, pressione e segure o botão por 2 segundos.

OBS: Ao pressionar o dispositivo, sua intensidade aumenta.

Funções automáticas:

- **Proteção:** Quando o massageador fica travado por questões de segurança, ele para de funcionar. Para restaurar o funcionamento, pressione o botão de liga/desliga.
- **Proteção contratempo máximo de uso:** O dispositivo desliga automaticamente após 10 minutos de funcionamento. Para reiniciar, pressione o botão liga/desliga e ajuste a velocidade conforme necessário.

Indicador de nível de pressão

O massageador possui **3 níveis de velocidade**, que podem ser alternados pressionando brevemente o botão **ON/OFF**:

Status	Nível de pressão
Verde	1600 RPM
Vermelho	2200 RPM
Branco	2800 RPM

5. GUIA DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A pistola não está ligando.	- Se você não pressionou o botão "ON/OFF" por tempo necessário.	- Para ligar o produto, pressione por 3 segundos o botão "ON/OFF". Para desligar, realize o mesmo processo.
	- Deixou o produto inativo por um longo tempo e sem carregar.	- Carregue o aparelho uma vez a cada dois meses se você não o usar por um longo período.
	- Proteção por bloqueio de sobrecarga; bateria muito baixa.	- Deixar carregar completamente; após carga, testar sem resistência; se persistir, verificar se a cabeça

O aparelho desliga sozinho.	- Uso superior a 10 minutos continuamente	está travando ou emperrando. - Há função de temporizador, o produto será desligado automaticamente após 10 minutos.
O produto não carrega.	- Usou o cabo de carregamento conectado de forma inadequada. - Cabo ou adaptador defeituoso; porta Type-C suja.	- Testar outro cabo 5V/2A e outra tomada; limpar a porta Type-C com ar comprimido seco.
Massagem muito fraca.	- O nível de intensidade selecionado é muito baixo. - Se a carga da bateria estiver baixa ou se esgotando.	- Por favor, pressione rapidamente o botão "ON/OFF" para aumentar o nível de intensidade. - Por favor, carregue o aparelho em uma fonte de energia.
Ruído excessivo.	- Cabeça não encaixada corretamente; folga interna; desgaste do motor.	- Desligar e encaixar novamente a cabeça; se o ruído persistir, interromper uso e levar para assistência técnica.
Cabeça não encaixa ou sai.	- Encaixe sujo; peça danificada; instalação incorreta.	- Limpar o pino e o encaixe; verificar se a haste está alinhada; não forçar a instalação; substituir acessório danificado.
Aquecimento excessivo	- Uso contínuo prolongado além do tempo recomendado; ventilação obstruída.	- Interromper uso e deixar esfriar por 10 a 20 minutos; reduzir tempo de sessões; não bloquear aberturas de ventilação.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: RM-MP0005A

Dimensões: 77 x 69 x 35 mm

Peso: 195 g

Configurações de velocidade: 3

Velocidade: 1600 - 2800 RPM

Desligamento automático: Até 10 minutos ou baixa carga de bateria

Fonte de energia: Bateria de lítio recarregável

Tempo de carregamento da bateria: Aproximadamente 2 horas

Tempo de funcionamento médio: aproximadamente 4 horas (nível 1)

Potência máxima: 30 W

Amplitude: 4,5 mm

Entrada nominal: 5V == 2A

Ruído de funcionamento: 50 dB

7. GARANTIA

O produto possui **12 meses de garantia**, contados a partir da emissão da nota fiscal ou da entrega ao primeiro adquirente, sendo:

- **3 meses de garantia legal**
- **9 meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic.

A cobertura é válida desde que o produto tenha sido instalado e utilizado conforme as orientações do manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma análise técnica para verificar a existência de defeito de fabricação. Caso sejam identificadas alterações na originalidade do produto, o conserto será cobrado. A central de atendimento entrará em contato com o cliente para informar o valor e o motivo do orçamento.

O produto deve ser enviado devidamente embalado, acompanhado da nota fiscal, dos dados cadastrais do cliente e de todos os acessórios originais.

Se o reparo não for possível, a Relaxmedic garante a substituição do produto.

A garantia será anulada nos seguintes casos:

- Instalação ou uso em desacordo com o manual de instruções.
- Sinais de violação ou mau uso.
- Danos causados por acidentes, quedas, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não autorizados pela Relaxmedic.

A GARANTIA É VÁLIDA SOMENTE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTEPRODUTO.

Relaxmedic Importação, Exportação Ltda

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel/whatsapp.: (11) 3393-3688