



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

MASSAGEADOR SHIATSU PÉS ZENFEET

RM-FM8023A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	3
2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	5
3. MODO DE USAR	6
6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10
7. TERMOS DE GARANTIA.....	10

Apresentação:

Relaxmedic é uma empresa brasileira com uma sólida trajetória de inovação e excelência no mercado de saúde e bem-estar. Com mais de 20 anos no mercado, nossa missão é oferecer produtos que melhorem a qualidade de vida e proporcionem momentos de relaxamento, saúde e bem-estar a nossos clientes.

Ao longo dos anos, expandimos nossa linha de produtos, que hoje inclui soluções completas em massagem, cuidados pessoais, saúde, fitness e suplementação alimentar. Nossos produtos são desenvolvidos com foco em alta qualidade, durabilidade e tecnologia de ponta, sempre priorizando o conforto e a segurança dos nossos consumidores.

A Relaxmedic está comprometida em investir continuamente em inovação, buscando as melhores tecnologias e matérias-primas do mercado. Este compromisso com a excelência reflete-se em cada produto que oferecemos, sempre com o objetivo de proporcionar bem-estar de forma eficaz e acessível.

Agradecemos a sua confiança e esperamos que nossos produtos tragam mais conforto e saúde ao seu dia a dia.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

O MASSAGEADOR SHIATSU PÉS ZENFEET é o massageador com multifunções para pernas e pés. Conta com painel ao toque LCD, função aquecimento que intensifica o resultado da massagem e alça rotativa 360° para maior praticidade na hora de relaxar.

- Portátil e leve
- Bivolt
- Controle Remoto

-
- Função Aquecimento com 3 intensidades: 42°C , 46°C e 50°C
 - 6 tempos de massagem ajustáveis: 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutos
 - Design aberto
 - Painel mais amplo para fácil visualização e controle das funções
 - Display LCD
 - 3 modos automáticos de massagem
 - 3 manuais de massagem personalizáveis
 - 3 níveis de velocidades ajustáveis
 - 3 tipos de massagem: shiatsu, rolamento e pressão
 - Botão ligar/desligar
 - Direções ajustáveis: de cima para baixo e de baixo para cima
 - Alça rotativa 360° para suporte de chão e transporte
 - Capa de proteção removível e lavável
 - Armazenamento de fio ocultável na base

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados do MASSAGEADOR SHIATSU PÉS ZENFEET podem aumentar efetivamente sua vida;

As tomadas de alimentação elétrica precisam estar dentro dos padrões da norma brasileira ABNT NBR5410 de Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Conforme a norma recomendamos não utilizar adaptadores para plugs de tomada, pois podem causar mau contato na alimentação do equipamento, onde tais oscilações nas tensões prejudicam os circuitos eletrônicos internos. É essencial cuidados com animais domésticos, pois podem adentrar ou eliminar secreções que podem causar curto-circuito na parte eletrônica inferior por dejetos e secreções dos animais, causando danos não coberto pela garantia de fábrica.

Ambiente de uso

1. Não use o massageador em um ambiente excessivamente úmido ou poeira.
2. Não use em locais com temperatura acima de 40°C.
3. Não coloque ao ar livre.
4. Não use próximo a forno elétrico, fogão ou luz solar direta.

Atenção

1. Não use o massageador para outros fins que não a massagem. Isso pode resultar em acidente ou ferimento.
2. Não use o massageador quando a tampa do tecido estiver rasgada ou ausente.
3. Não se levante ou sente no próprio massageador.
4. Não substitua nenhuma peça, a menos que seja da Relaxmedic.
5. Não insira ou deixe cair um objeto na abertura do produto.
6. Este produto não pode ser usado como tratamento. Este é um produto de uso

doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.

7. Não use se estiver sob o efeito do álcool ou doente.
8. Indicamos que use somente após uma hora após as refeições
9. Não use por mais de mais de 30 minutos seguidos, isso pode estressar sua musculatura.
10. Não insira o dedo da mão ou pé no rolo (mecanismos internos) deste produto.
11. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

Instâncias em que o massageador não deve ser usado

Nas seguintes circunstâncias, desligue a energia imediatamente e desconecte o plugue da fonte de alimentação da tomada elétrica:

1. Se derramar água no massageador.
2. Se sentir dor intensa ou anormal durante a massagem, pare a operação e consulte seu médico.
3. Se você detectar qualquer mau funcionamento ou qualquer outra condição anormal durante a operação.
4. Se houver uma falha de energia, poderão ocorrer ferimentos quando a energia for restaurada inesperadamente.
5. Se houver raios.

Desmontagem e reparo

1. O massageador só deve ter revisão ou reparação pelo centro de atendimento ao cliente da Relaxmedic ou parceiros credenciados.
2. Os usuários NÃO devem desmontar ou reparar o massageador.

Notas sobre o plugue e o cabo de alimentação

1. Não desconecte o plugue da tomada elétrica com força.
2. Não conecte ou desconecte o plugue da tomada com as mãos molhadas. Isso pode resultar em choque elétrico ou problemas na máquina.
3. Ao desconectar o plugue, puxe-o segurando o plugue, não o cabo.
4. Não coloque o cabo de alimentação sob o objeto pesado.
5. Não enrole o cabo de força ao redor do massageador durante a operação, pois isso pode danificá-lo e resultar em incêndio ou choque elétrico.
6. Não use o massageador com um cabo danificado ou adultere o cabo.
7. Use apenas o plugue e os acessórios fornecidos.
8. Não use o massageador se a tomada elétrica estiver excessivamente frouxa.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (ferimentos).
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:


- Marca-passo;
- Grávidas;
- Flebite;
- Trombose;
- Problemas circulatórios;
- Osteoporose;
- Acroparestesia;
- Ossos frágeis;

- Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando conectado a tomada. Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver usando-o e antes de limpá-lo.
- Não use na banheira nem durante o banho.
- Não enrole o cabo elétrico excessivamente, pois isso pode causar danos ao cabo.
- Não toque no aparelho se ele tiver caído na água. Retire imediatamente da tomada.
- Não fique em pé sobre o aparelho. Use somente sentado.
- Não use o aparelho sob um cobertor, poderá ocorrer um superaquecimento e causar um incêndio, choques elétricos ou ferimentos.

2. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Certifique-se de remover o plugue da tomada elétrica antes de limpar o massager.
2. Não use gasolina, diluente ou qualquer outro solvente abrasivo no massager.
3. Use um pano seco ao limpar o massager, nunca use um pano úmido para limpar o massager ou o interruptor.
4. Quando necessário, remova as tampas de tecido para limpeza para garantir uma boa higiene.

5. Quando não estiver em uso por um longo período, é aconselhável que o cabo de força do massageador seja enrolado na parte inferior do massageador e seja armazenado em um local livre de poeira e umidade.
6. Não guarde o massageador perto de calor intenso ou de uma chama aberta. Não deixe o massageador sob luz solar direta por um longo período.

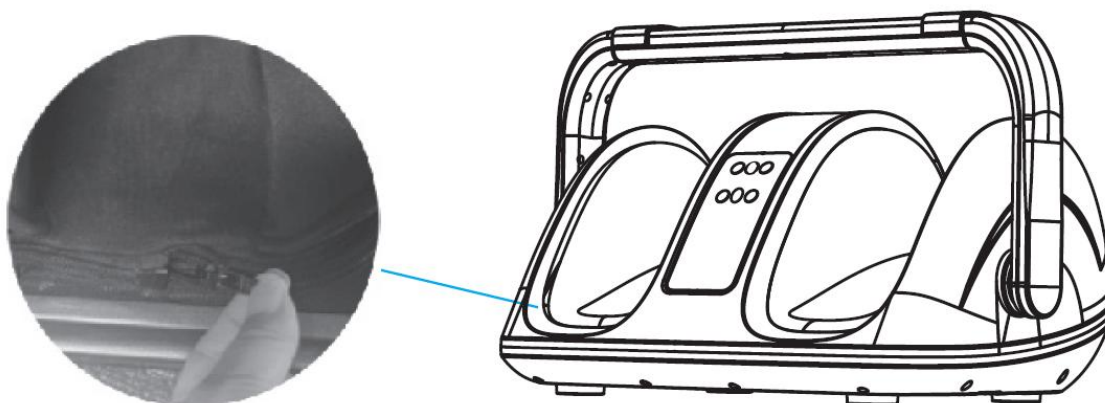

3. MODO DE USAR

1.  - Ligue / desligue o massageador. A massagem automática, de 15 minutos, irá iniciar.

Aperte o botão por alguns segundos e acione o modo “Modo noturno”. Dessa forma o massageador estará ligado, porém sem as luzes do painel acesas.

2. **M** - Aperte o botão “Modo” para escolher dentre os programas de massagem: “Manual”, “Modo 1”, “Modo 2” ou “modo 3”. O visor do aparelho indicará qual o modo escolhido.

Importante: quando você alterar a direção do massageador (botão Direção) ou a velocidade da massagem (Intensidade), automaticamente o massageador irá mudar o programa para Manual.

Automático	Modo 1	Sensação da pressão é mais intensa.
	Modo 2	Sensação de shiatsu é mais intensa.

	Modo 3	Sensação de rolamento é mais intensa.
Manual	Pressão	Desfrute da pressão em diferentes velocidades e escolha de direção.
	Shiatsu	Desfrute do shiatsu em diferentes velocidades e escolha de direção.
	Rolamento	Desfrute do rolamento no sentido horário e anti-horário em diferentes velocidades de sua escolha.



3. - Tempo de massagem ajustável. De 5 minutos a 30 minutos. (5, 10, 15, 20, 25 e 30 minutos). O visor do aparelho indicará o tempo restante de massagem. Ao terminar o tempo de massagem, o massageador desligará automaticamente.



4. - Ligar / desligar a função de aquecer. Pressione esta tecla para iniciar a função de aquecimento, pressione novamente para parar. Possui 3 níveis de aquecimento: 42°C, 46°C e 50°C.



5. - Velocidade de três níveis, no modo manual: alto, médio, baixo. Ao acionar essa função, o massageador irá automaticamente para o programa Manual de massagem.





6. - Duas direções: de cima para baixo (dos dedos pés para o calcanhar) e de baixo para cima (do calcanhar para os dedos dos pés). Aperte para trocar o modo.

4. DETALHES DO PRODUTO


Alça ajustável 360°

1. A Alça pode ser girada em 360 graus. A alça não é apenas o suporte do massageador, mas também para transporte.
2. Quando a alça gira para a parte inferior da máquina, isso permite que você se sinta em uma posição natural durante a massagem nos pés / panturrilha / calcanhar / tornozelo.

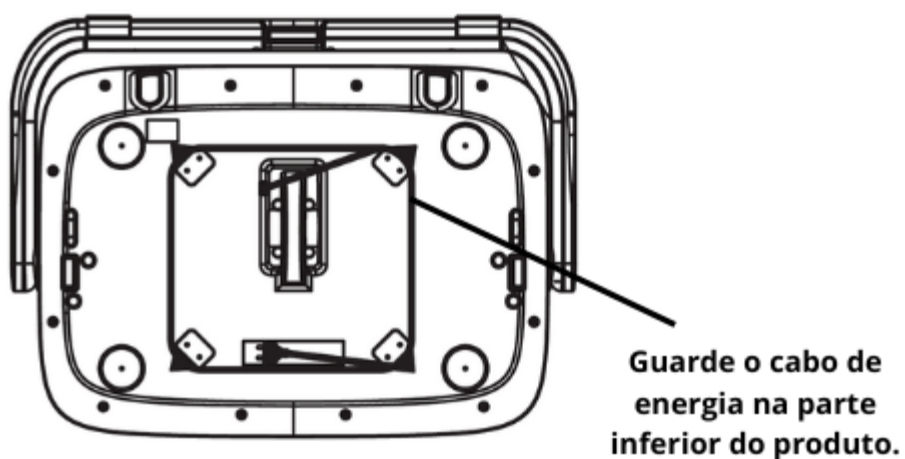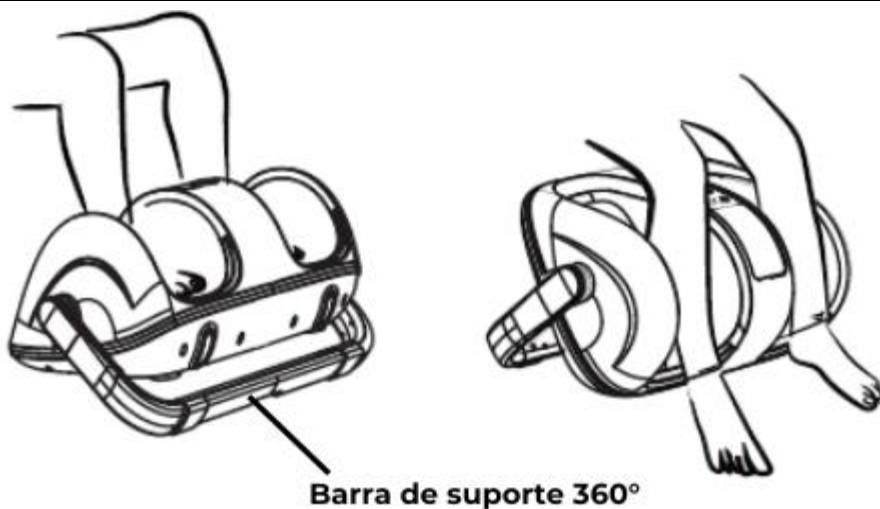

Como ajustar a alça

Pressione o botão redondo nas duas extremidades da alça ao mesmo tempo e levante a máquina. Solte o botão quando a máquina atingir os ângulos ideais. Verifique se o botão redondo está travado corretamente antes de usar.

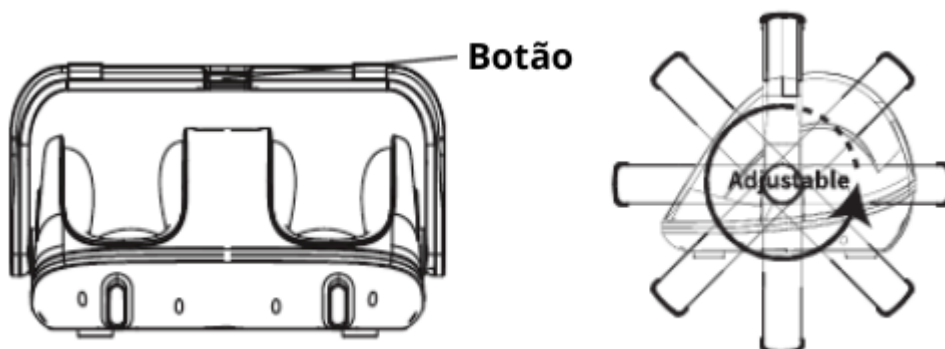

Controle Remoto

O controle permite selecionar entre diferentes modos de massagem, ajustar direção da massagem e controlar a função de aquecer, proporcionando uma experiência de relaxamento personalizada.



5. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBELMAS	SOLUÇÃO
O massageador não está funcionando.	• Certifique-se de que o aparelho está devidamente conectado a uma tomada que funcione. • Se o aparelho acender, mas mesmo assim o massageador não funcionar,

	desligue e tire da tomada e entre em contato com nossa equipe.
O massageador desliga repentinamente.	• Certifique que o aparelho está conectado e ligado. • O tempo limite foi atingido, o aparelho desliga automaticamente após 15 minutos de uso. • O aparelho possui proteção contra superaquecimento. Aguarde até que ele esfrie completamente antes de retomar o uso. • Certifique-se que não está apoiando muito força no aparelho. Mantenha os pés relaxados ao colocá-los no massageador. Não fique de pé ou aplique força excessiva enquanto usa o aparelho para evitar danos aos mecanismos internos.
Direção de uso correta	• Mantenha o painel voltado para você para evitar ferimentos nos pés.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 51 x 37.5 x 25cm

Peso: 6,27kg

Alimentação: 127V/220V (Bivolt)

Potência: 55 W

Frequência: 60 Hz

Garantia: 1 ano

7. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em

contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **2 a 5 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688