



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM BEM-ESTAR

COMPRESSOR DE PANTURRILHA F10 THERMO RM-FM0901A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1.	CUIDADOS	3
2.	LIMPEZA E ARMAZENAMENTO	5
3.	DETALHES DO PRODUTO	5
4.	MODO DE USAR	6
5.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	9
6.	GUIA DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	9
7.	TERMOS DE GARANTIA	10

APRESENTAÇÃO

Relaxmedic é uma empresa brasileira com uma sólida trajetória de inovação e excelência no mercado de saúde e bem-estar. Com mais de 30 anos no mercado, nossa missão é oferecer produtos que melhorem a qualidade de vida e proporcionem momentos de relaxamento, saúde e bem-estar a nossos clientes.

Ao longo dos anos, expandimos nossa linha de produtos, que hoje inclui soluções completas em massagem, cuidados pessoais, saúde, fitness e suplementação alimentar. Nossos produtos são desenvolvidos com foco em alta qualidade, durabilidade e tecnologia de ponta, sempre priorizando o conforto e a segurança dos nossos consumidores.

A Relaxmedic está comprometida em investir continuamente em inovação, buscando as melhores tecnologias e matérias-primas do mercado. Este compromisso com a excelência reflete-se em cada produto que oferecemos, sempre com o objetivo de proporcionar bem-estar de forma eficaz e acessível.

Agradecemos a sua confiança e esperamos que nossos produtos tragam mais conforto e saúde ao seu dia a dia.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

O **Compressor de Panturrilha F10 Thermo** conta com **5 níveis de aquecimento**, **3 modos de massagem** e **3 níveis de intensidade**, permitindo que o usuário ajuste o funcionamento conforme sua necessidade. Seu **painel intuitivo**, equipado com **indicadores luminosos de intensidade, modo e temperatura**, facilita a operação e torna o uso simples e direto. Ideal para promover **bem-estar, conforto** e auxiliar na **sensação de relaxamento** após atividades físicas ou esforços do dia a dia.

IMPORTANTE: Leia atentamente estas instruções neste manual antes de usar o dispositivo. O não cumprimento das instruções fornecidas no manual ou o uso de maneiras diferentes das mencionadas neste manual podem resultar em ferimentos em você ou danos ao

produto.

1. CUIDADOS

- Leia atentamente as instruções de uso e não use este produto por muito tempo para evitar dores musculares causadas por massagem excessiva;
- Técnicos de reparo não devem desmontar ou consertar este produto;
- Se o controlador estiver danificado, entrar em contato com o SAC da Relaxmedic;
- É proibido o uso em locais úmidos ou quando o produto estiver em contato com água ou outros líquidos;
- Após o uso, coloque o massageador em um local seco para evitar umidade e luz solar direta;
- Não o coloque em locais com fusíveis, explosivos ou soluções químicas;
- Não toque o produto com objetos pontiagudos para evitar danos às peças do produto;
- Se você sentir qualquer desconforto físico ou qualquer anormalidade durante o uso, pare de usá-lo imediatamente;
- Use-o de acordo com a força e o tempo de massagem necessários para uma experiência confortável;
- Sempre que necessário, consulte um médico e/ou especialista para melhor utilização do produto;
- O aparelho é indicado para alívio temporário de dores e desconfortos musculares leves;
- Não utilizar enquanto dorme;
- Não utilizar enquanto estiver consumindo bebida alcoólica ou após consumir;
- Não utilizar dirigindo ou em pé;
- Não utilizar simultaneamente com outros aparelhos de terapia;
- Não desmontar, furar a bateria ou expor ao calor;
- Pessoas com sensibilidade térmica podem sofrer queimaduras;
- Checar pele durante uso, para evitar bolhas ou irritações.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.

Não utilize este produto caso apresente qualquer uma das condições abaixo:

- Infecções, inflamações, sangramentos, feridas, úlceras, bolhas, erupções cutâneas, hematomas, tumores, queimaduras ou dor inexplicável na área de aplicação.
- Pele inchada, irritada, machucada, sensível ou com processos inflamatórios.
- Doenças cardíacas, insuficiência cardíaca, pressão arterial instável ou histórico de infarto.
- Uso de marca-passo ou outros dispositivos eletrônicos implantáveis.
- Trombose, flebite, embolia pulmonar, edema, câncer venoso, varizes severas ou quaisquer doenças vasculares graves.
- Distúrbios de coagulação sanguínea.
- Osteoporose severa, fraturas recentes, entorses, lesões musculares ou ossos frágeis.
- Edema decorrente de insuficiência renal.
- Perda de sensibilidade, dormência, paralisia ou sensibilidade reduzida nos membros.
- Pós-operatório recente ou presença de próteses/metais na área de tratamento.
- Doenças infecciosas da pele, vermelhidão, inchaço, queimaduras ou irritações ativas.
- Febre, fadiga extrema, alterações de pressão ou mal-estar generalizado.
- Gestantes ou mulheres que tenham realizado parto recentemente.
- Somente para uso adulto.

- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:

- Osteomielite.
- Doenças cardíacas.
- Que sofrem de doenças infecciosas da pele, vermelhidão, inchaço, escaldaduras, etc.
- Alto risco com condições médicas graves que não são adequados para massagem.
- Com ossos frágeis ou danificados.
- Com outros aparelhos metálicos no corpo, como membros protéticos.
- Com doença cardíaca grave ou pressão arterial anormal.

- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.

- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.


2. LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

A limpeza do compressor deve ser feita com cuidado para garantir durabilidade e bom funcionamento. A unidade principal, incluindo o visor e os botões, deve ser higienizada apenas com um pano macio, seco ou levemente umedecido em água, evitando que qualquer líquido entre na tela ou na porta USB-C. Deixe-a secar naturalmente em local arejado, longe do sol direto e de fontes de calor.

Não utilize alvejante, detergentes, ferro de passar. Após o uso, o produto deve ser guardado em um local seco, ventilado e protegido de poeira e umidade.


3. DETALHES DO PRODUTO

Controlador

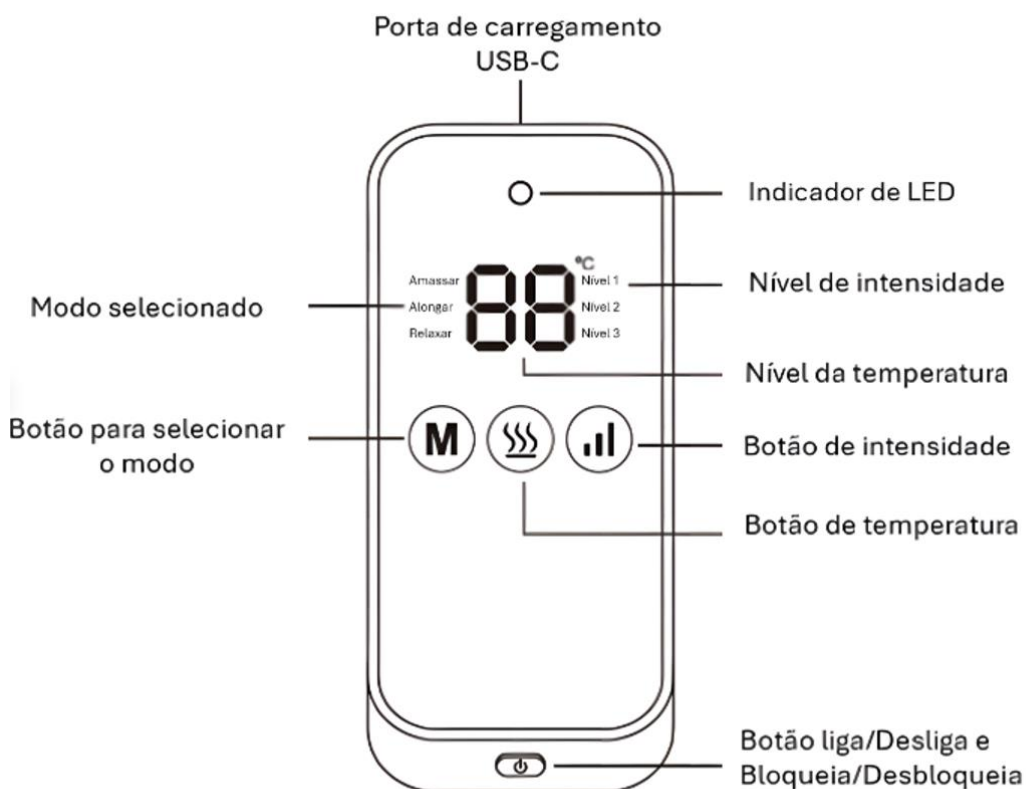

4. MODO DE USAR

Pressione o botão **Liga/Desliga** por 1 segundo para ligar o aparelho.

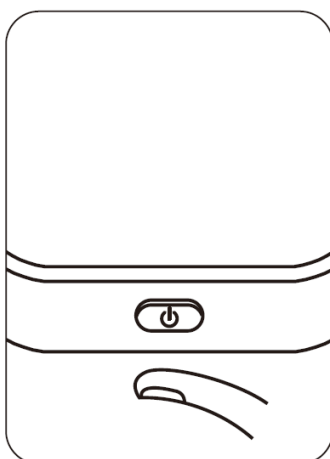

Escolha o modo de massagem no botão “**M**” sendo possível selecionar 1 dos 3 tipos massagem.



Modo 1 – Amassar

Modo 2 – Alongar

Modo 3 – Relaxar

Para ajustar a **intensidade da pressão** clique no botão “” e altere.



F-901B(mmHg)	Nível 1	Nível 2	Nível 3
Modo 1	206-259	233-300	259-310
Modo 2	171-217	207-233	233-284
Modo 3	259-310	310-336	336-362

Altere a temperatura clicando no botão “”, podendo variar entre 45°C, 50°C, 55°C, 60°C e 65°C.



Note: Quando o visor indicar “00°C” significa que o aquecimento está desligado.

Quando o visor estiver bloqueado, serão exibidas barras que representam o nível atual da bateria:



- **3 barras:** bateria totalmente carregada
- **2 barras:** bateria em nível médio
- **1 barra:** bateria baixa ou quase descarregada

Após 1 minuto do produto ligado, o display será bloqueado de forma automática. O LED vermelho indica esse bloqueio, para desbloquear basta um clique no botão de liga/desliga.

Bloqueado:



Desbloqueado:



5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome: Compressor de Panturrilha F10 Thermo

Modelo: RM-FM0901A

Dimensões: 64x45cm

Peso: 0,88g

Modos de Massagem: Amassar, Alongar e Relaxar.

Intensidade: 3 níveis

Quantidade de Câmaras: 2

Alimentação: USB-C

Potência: 5W

Capacidade da Bateria: 2500mAh

Entrada Nominal: 5V–2A

Tempo de Carregamento: 3,5h

Autonomia de Bateria: 3h

Vida útil da Bateria: 5 anos

6. GUIA DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Se você encontrar problemas ao usar o produto, consulte as dicas e soluções a seguir. Se estiver em estado de mau funcionamento ou não puder ser usado, desligue-o. Os usuários não devem desmontar ou consertar o produto por conta própria. Os danos ao produto causados por desmontagem ou reparo invalidarão a garantia do produto.

PROBLEMA	RAZÃO / SOLUÇÃO
O produto não está ligando normalmente.	Verifique a bateria e o botão liga/desliga. Confirme se o botão de massagem do interruptor está pressionado; Se o cabeçote de massagem está instalado no lugar certo;
O Produto não está carregando.	Verifique se o cabo USB Tipo-C está conectado corretamente na porta USB do controlador.

**O produto para de funcionar
repentinamente.**

Verifique se a bateria está fraca;
O tempo definido pelo cronômetro automático já
passou;
Entre em contato com a assistência técnica se o
problema persistir.

7. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: 12 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo os 03 (três) primeiros meses correspondentes à garantia legal e os 09 (nove) meses seguintes à garantia contratual concedida pela Relaxmedic, desde que o produto tenha sido instalado e/ou utilizado conforme as orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por análise técnica prévia para verificação de eventual defeito de fabricação. Caso sejam identificadas alterações na originalidade do produto, o conserto será cobrado, e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e o motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado da nota fiscal, dos dados cadastrais do cliente e de todos os seus acessórios.

Caso não seja possível realizar o reparo, a empresa garante a substituição do produto.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto esteja em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Sejam identificados sinais de violação ou mau uso;
- O produto sofra qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não credenciados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao Consumidor:

Site: www.gruporelaxmedic.com.br

E-mail: suporte@gruporelaxmedic.com.br

Telefone/WhatsApp: (11) 3393-3688