



Relaxmedic
ESPECIALISTA EM BEM-ESTAR

ESTEIRA DE MASSAGEM YOGANI

RM-EM8619A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

V2.1225





ÍNDICE

01. CUIDADOS	03
02. LIMPEZA	04
03. MODO DE USAR	04
04. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	06
05. TERMOS DE GARANTIA	07

APRESENTAÇÃO

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de bem-estar no Brasil, a Relaxmedic desenvolve soluções pensadas para trazer mais saúde, conforto e momentos de relaxamento para o seu dia a dia.

De massagedores portáteis a poltronas de massagem, passando por produtos de beleza, higiene e fitness, nossa linha foi criada para acompanhar você em diferentes momentos da rotina - sempre com praticidade, qualidade e cuidado.

Trabalhamos continuamente para oferecer produtos inovadores e um atendimento comprometido, porque acreditamos que se sentir bem faz toda a diferença.


Sinta-se bem onde estiver. Sinta-se Relaxmedic.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

A ESTEIRA DE MASSAGEM YOGANI foi desenvolvida para proporcionar conforto, relaxamento e bem-estar, aliando tecnologia e praticidade em um único equipamento. Seu sistema de massagem utiliza airbags (bolsas de ar) que realizam movimentos de compressão controlada, promovendo alongamento completo do corpo e atuando em conjunto com a função de aquecimento, auxiliando no alívio das tensões musculares e na promoção de uma sensação geral de relaxamento corporal.

Com diferentes modos de massagem, níveis de intensidade ajustáveis e seleção de áreas específicas do corpo, a Esteira de Massagem Yogani permite uma experiência personalizada, adaptando-se às necessidades e preferências de cada usuário. O sistema de temporização automática contribui para uma utilização segura, encerrando o funcionamento ao final do tempo programado.





Além disso, o uso do equipamento proporciona uma sensação revigorante que permanece ao longo do dia, contribuindo para maior conforto, disposição e bem-estar. Este manual foi elaborado para orientar o uso correto e seguro do produto, apresentando informações importantes sobre seu funcionamento, cuidados e recomendações.

01. CUIDADOS

- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um local seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar situações de risco;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;
- Não utilize enquanto você dorme;
- Para evitar a estimulação excessiva dos músculos, o tempo de massagem recomendado não deve exceder 20 minutos de cada vez, caso sinta desconforto.
- Evite o contato do dispositivo com água, altas temperaturas e contato direto luz solar;
- Reparações só podem ser efetuadas por uma pessoa especializada e autorizada. O uso impróprio e reparos não autorizados não são permitidos por razões de segurança e levar à perda da garantia.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos). Interrompa o uso caso sinta algum desconforto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo, ou outros, devem consultar um médico antes de usar o produto:
- Com fraturas, osteoporose, hérnia de disco lombar, espondilolistese,



anormalidades da coluna ou articulações.

- Flebite ou flebotrombose, pacientes pulsáteis, diastólicos venosos, inflamação aguda, epilepsia e aqueles que fizeram cirurgia de substituição articular recentemente.
- Com ferida no local de uso ou não tenham cicatrizado completamente.
- Com doenças cardíacas, pressão arterial anormal e estado de embriaguez.
- Com doença de pele ou infecção de pele, como neurodermatite, púrpura e acne etc.
- Com pele vulnerável e sensível, pacientes com implantes metálicos.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- Somente para uso adulto.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

02. LIMPEZA

Para efetuar a limpeza, mantenha o produto desligado e desconectado do carregador. Utilize um pano macio levemente umedecido em água para higienizar a superfície externa e, se necessário, aplique uma pequena quantidade de sabão neutro no pano. Após a limpeza, passe um pano seco para remover qualquer umidade. Não utilize álcool, solventes, abrasivos, produtos químicos fortes ou esponjas ásperas, pois podem danificar o acabamento. Nunca mergulhe o aparelho em água ou o coloque sob a torneira. Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de guardar ou utilizá-lo novamente.

03. MODO DE USAR

Conecte o cabo à fonte do produto. Em seguida, conecte a fonte ao próprio produto. Após confirmar que todos os cabos estão corretamente conectados, insira o plugue na tomada para ligar o produto.

Massagem de Torção

Movimentos que simulam torções suaves, girando ou alterando pressões laterais.

Massagem de alongamento

Massagem que proporciona alongamentos mais amplos de músculos e articulações.





Massagem deslizamento

Movimentos contínuos e ritmados, como uma massagem deslizante.

Massagem energizante


Modo mais intenso, com estímulos de tapotagem

Para uma utilização correta e segura da Esteira de Massagem Yogani, siga atentamente as instruções abaixo:

- Escolha um local adequado para utilização do equipamento.
- Antes de posicionar a esteira no chão, verifique se a superfície está limpa, seca, plana e livre de objetos, como pedras, grampos, pregos, parafusos ou quaisquer objetos pontiagudos ou perfurantes que possam danificar o produto.
- Coloque a esteira completamente aberta sobre o chão, evitando dobras, torções ou sobreposições.
- Certifique-se de que não haja objetos sob a esteira que possam comprometer o funcionamento dos airbags.
- Utilize roupas leves e confortáveis durante a utilização.
- Antes de deitar-se sobre a esteira, retire do corpo objetos como chaves, moedas, celulares, cintos, joias, relógios ou qualquer item rígido ou perfurante.
- Deite-se cuidadosamente sobre a esteira, alinhando o corpo às áreas de massagem.
- Conecte o equipamento à fonte de energia utilizando exclusivamente o adaptador fornecido.
- Pressione o botão de ligar para iniciar o funcionamento.
- Selecione o modo de massagem desejado (Torção, alongamento, deslizamento ou energizante).
- Ajuste o nível de intensidade conforme sua preferência e conforto.
- Ative a função de aquecimento, se desejar.
- Selecione o tempo de funcionamento (10, 20 ou 30 minutos).
- Ao final do tempo programado, o equipamento desligará automaticamente.



DETALHES DO CONTROLE:

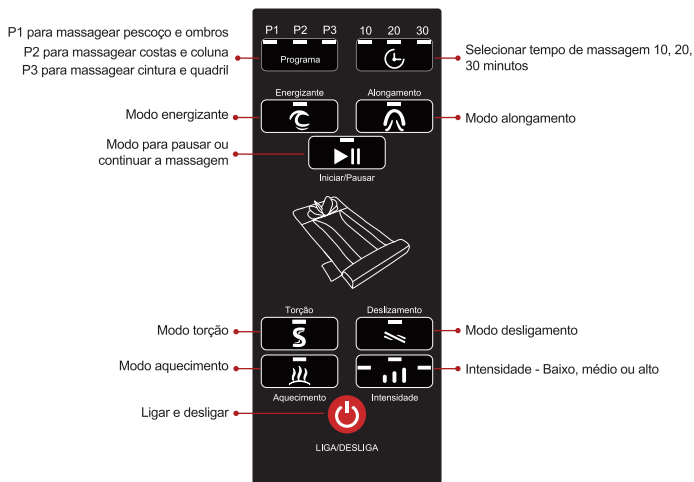

04. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nome: Esteira de Massagem Yogani

Modelo: RM-EM8619A

Peso: 4kg

Voltagem: Bivolt

Peso Suportado: 100kg

Alimentação: DC12V-2.5A


Dimensão: 120 cm x 60cm

Peso suportado: 100Kg

Temperatura de aquecimento: 55°C +/- 5°C (dependendo da temperatura do ambiente)

Potência: 30W

Conteúdo da embalagem:

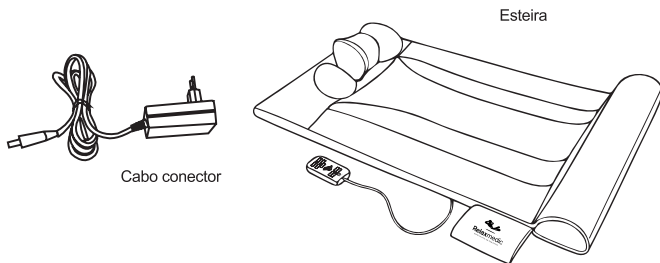

05. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: 12 meses, contados a partir da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo os 03 (três) primeiros meses correspondentes à garantia legal e os 09 (nove) meses seguintes à garantia contratual concedida pela Relaxmedic, desde que o produto tenha sido instalado e/ou utilizado conforme as orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por análise técnica prévia para verificação de eventual defeito de fabricação. Caso sejam identificadas alterações na originalidade do produto, o conserto será cobrado, e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e o motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado da nota fiscal, dos dados cadastrais do cliente e de todos os seus acessórios.

Caso não seja possível realizar o reparo, a empresa garante a substituição do produto.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto esteja em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Sejam identificados sinais de violação ou mau uso;
- O produto sofra qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não credenciados pela Relaxmedic.

Revestimento:

Os revestimentos usados nos estofados tem garantia de 90 dias, em relação a: esgarçamento da costura, desfiados não causados por mau uso e desbotamento natural.

Esta garantia não abrange:

Enfraquecimento normal das fibras, causados pelo uso do produto; Achatamento; Pilling (bolinhas); Diferenças de tonalidade do revestimento entre as partes do produto, detectadas após a entrega; possíveis deformações ocasionadas pela lavagem do estofado e danos causados pelas impermeabilizações. Não esqueça: veludos e tipos aveludados (Suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

Espumas:

A garantia para espumas é de 90 dias em relação à perda de resistência. É importante saber que com o uso do estofado e o passar do tempo, é normal as espumas sofrerem uma pequena deformação.

Não esqueça: o amaciamento dos assentos e das almofadas são consequências naturais da utilização do produto. Algumas deformações são perfeitamente normais, não podendo ser confundidas com defeitos.

**A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA
NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.**



Atendimento ao Consumidor:

Website: www.gruporelaxmedic.com.br

E-mail: suporte@gruporelaxmedic.com.br

Telefone/WhatsApp: (11) 3393-3688